

SERWIS I GWARANCJA

SERWIS I GWARANCJA – 12 MIESIECY

POLKARDBIS SP. Z O.O. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu **1-go roku** od daty zakupu urządzenia.

Należy zachować i przedłożyć oryginał dowodu zakupu urządzenia. **POLKARDBIS SP. Z O.O.** naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanym punktem serwisowym i było użytkowane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem: **POLKARDBIS SP. Z O.O., ul. Marka Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel. 89 / 5334850 89 / 5338777** w celu naprawy lub wymiany urządzenia.

Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca, natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

Producent: WATERPIK - 1730 East prospect Road, Fort Collins, CO 80553-0001, USA

Dystrybucja w Polsce: **POLKARDBIS Sp. z o.o., ul. Marka Kotańskiego 2, 10-166 OLSZTYN**
tel/fax: 89 / 5338777, www.polkardbis.pl, e-mail: biuro@polkardbis.pl

Data zakupu:

Nr seryjny:

Pieczęć i podpis sprzedawcy

.....

.....
.....
.....
.....

waterpik®

waterpik®

IRYGATOR BEZPRZEWODOWY

Model WF – 03



.....
www.polkardbis.pl

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku każdego urządzenia elektrycznego należy zawsze, szczególnie w obecności dzieci stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa.

UWAGA! – W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, porażenia prądem, pożaru, poważnych obrażeń lub uszkodzeń ciała, należy:

dokładnie poinstruować i dopilnować dzieci oraz osoby specjalnej troski o właściwym użytkowaniu urządzenia.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Nie należy kierować strumienia wody pod język, do ucha, do nosa lub innych delikatnych miejsc, bez odpowiednich końcówek zalecanych przez WATERPIK Technologies. Urządzenie to, zdolne jest do wytworzenia ciśnienia, które może spowodować uszkodzenia w tych obszarach.
- Nie należy używać baterii litowych (akumulatory litowe) w tym produkcie. Akumulatory te, zdolne są do wytwarzania ciśnienia, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia. Zastosowanie baterii litowych spowoduje utratę gwarancji.
- Używać urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją lub zalecany przez stomatologa.
- Używać wyłącznie z końcówkami zalecanymi przez WATERPIK Technologies.
- Zbiornik należy napełniać wodą lub płynami zalecanymi przez stomatologa.
- Nie wrzucać lub wkładać żadnych obcych przedmiotów do otwartego urządzenia.
- Nie włączać ani nie używać w miejscu, gdzie stosowany jest tlen lub preparaty w aerozolu.
- Nie używać płynów do ust lub płukanek zawierających JOD lub WYBIELACZE.
- Usunąć biżuterię ustną przed użyciem produktu.
- Nie używać! Jeżeli masz otwartą ranę w jamie ustnej.
- Jeżeli lekarz stomatolog zalecił leki do premedykacji przed zabiegiem stomatologicznym, należy skonsultować się z nim przed użyciem tego produktu lub innego urządzenia do higieny jamy ustnej.
- Dzieci powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe. Urządzenie nie służy do zabawy.


EKSPLOATACJA BATERII, CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

- Baterie alkaiczne i akumulatory NiMH są dopuszczalne
- Baterie należy wkładać prawidłową polaryzacją
- Zaciski zasilania nie powinny być zwarte
- Nie wrzucać baterii do ognia
- Rodzaj i jakość baterii AA (R6) wpłynę na wydajność produktu
- Wymienić baterie w tym samym czasie na nowe baterie tego samego typu i marki
- Wyjąć baterie, kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu

Każdorazowo po przeprowadzeniu irygacji dowolnym płynem, urządzenie powinno być przepłukane. W tym celu należy napełnić zbiornik ciepłą wodą z kranu, końcówkę irygatora skierować do umywalki a następnie włączyć urządzenie aż do opróżnienia zbiornika na płyn.

Do czyszczenia i dezynfekcji zalecamy stosowanie preparatu **REDESEPT**. Preparat dostępny jest w miejscu zakupu urządzenia. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką.

OPIS URZĄDZENIA I WKŁADANIE BATERII

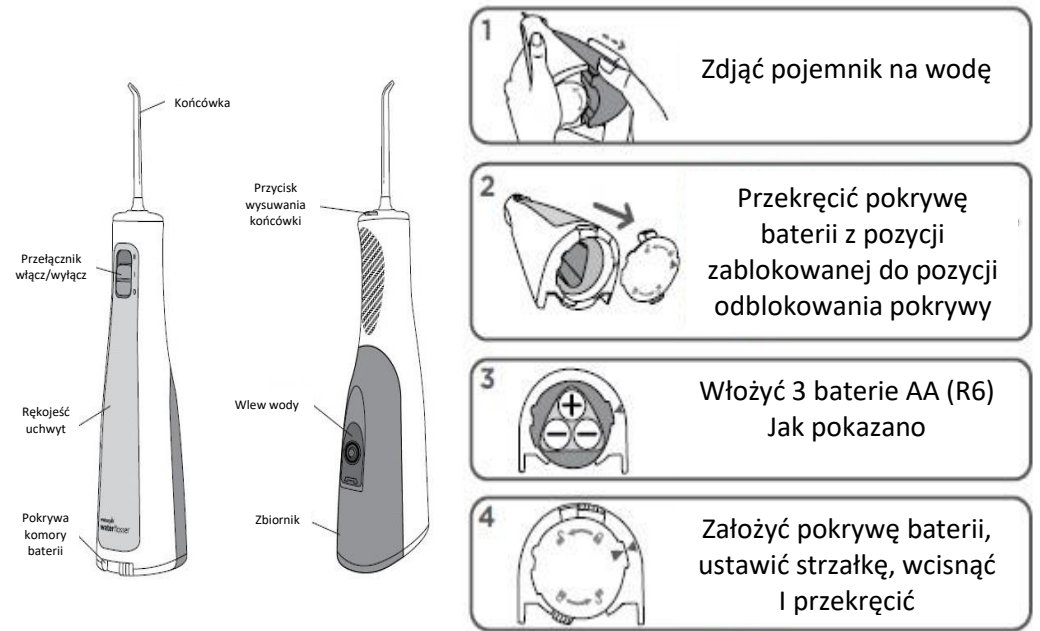

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

- Otworzyć wlew zbiornika. Następnie napełnić go letnią wodą, płynem do płukania jamy ustnej lub innym środkiem.
- Należy wybrać odpowiednią końcówkę i umieścić ją w ręczce. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów i przewodów urządzenia.
- Należy ustawić ciśnienie wody za pomocą przełącznika regulacji ciśnienia oraz ustawić końcówkę w wygodnej pozycji do irygacji. Początkujący użytkownik powinien ustawić ciśnienie na niższym poziomie.
- Końcówkę irygatora należy umieścić w ustach tak, aby była ukierunkowana na zęby i pochylić się nad umywalką z ustami lekko przymkniętymi wokół końcówki irygatora. Następnie włączyć urządzenie wyłącznikiem On/Off (0/I). Po kilku sekundach strumień wody zacznie płynąć z końcówki irygatora.
- Strumień wody należy pokierować na dziąsła pod kątem prostym do zębów, niemal ich dotykając. Woda powinna spływać z ust do umywalki. Irygacja powinna być przeprowadzona systematycznie wokół górnych i dolnych zębów z przerwami dla dokładnego oczyszczenia przestrzeni międzyzębowych.
- nie wolno używać urządzenia odwróconego do góry zbiornikiem. Po zakończeniu irygacji należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem On/Off (0/I).
- Końcówkę irygatora należy usunąć z rączki poprzez naciśnięcie przycisku do wyjęcia końcówek.