

Fairywill

Zestaw szczoteczek sonicznych z końcówkami Fairywill Family 507 Instrukcja obsługi



Dziękujemy za wybór zestawu Fairywill Family 507. Przed użyciem proszę uważnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcja obsługi szczoteczki sonicznej Fairywill 507

Cechy szczoteczki

- Wibracje soniczne, ponad 40 000 uderzeń na minutę, dynamiczne czyszczenie.
- Usuwa do 100% więcej płytki nazębnej w ciągu jednego tygodnia. *
- Poprawa zdrowia dziąseł w ciągu zaledwie 2 tygodni. *
- Wyraźnie bielsze zęby w ciągu zaledwie 2 tygodni. *
- 5 trybów: tryb wybielania, czyszczenie, tryb wrażliwy, tryb polerowania i tryb masażu.
- Unikalna konstrukcja włosia z falistymi zębami zapewnia dokładne czyszczenie dziąseł i trudno dostępnych miejsc.
- 2 minutowy inteligentny czasomierz z pauzą interwałową przypominającą co 30 sekund.
- Wymienna głowka szczoteczki do zębów.
- Stopień wodoodporności IPX7.
- Ładowanie przez USB, łatwe i wygodne do użytku w domu lub w podróży.
- Długotrwały akumulator, 1 ładowanie na około 30 dni użytkowania.

*W porównaniu do zwykłej manualnej szczoteczki do zębów.

Projekt


1. Głowica szczoteczki
2. Przycisk zasilania
3. Tryb wybielania
4. Tryb czyszczenia
5. Tryb wrażliwy
6. Tryb polerowania
7. Tryb masażu
8. Dioda ładowania
9. Port ładowania



UŻYTKOWNIE

- Załóż głowicę szczoteczki i upewnij się, że jest ona zablokowana na swoim miejscu.
- Wybierz swój preferowany tryb, naciskając przycisk zasilania. Możesz przełączać pomiędzy 5 trybami: wybielania, czyszczenia, wrażliwy, polerowania i masażu poprzez ciągłe naciskanie.
- Zmocz włosie i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
- Wcisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach z przodu, z tyłu i na powierzchniach żuchwy. Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na zęby ani przykładać włosia do jednego obszaru przez dłuższy czas.
- Dentyści zalecają, aby szczotkować zęby przez 2 minuty.
- Włącz czasomierz a szczoteczka automatycznie wyłączy się po 2 minutach.
- Aby uniknąć rozpryskiwania pasty do zębów, włączaj szczoteczkę dopiero po przyłożeniu jej do zębów i wyjmuj ją z ust dopiero po wyczyszczeniu zębów.

Zmiana głowki szczoteczki

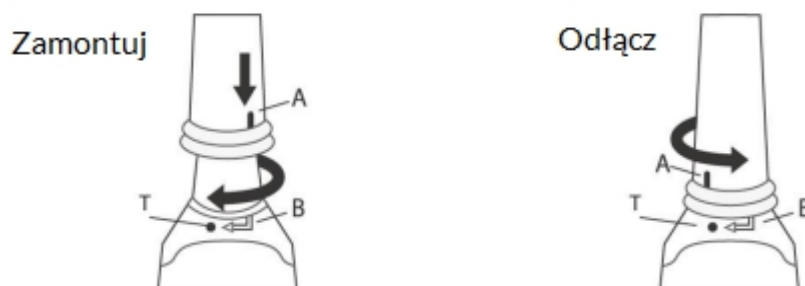

- Zamontuj: Wsuń główkę szczoteczki w dół do uchwyty. Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż A spotka się z T.
- Odłącz: Przekręć główkę szczoteczki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż A spotka się z B. Wyciągnij ją wzdłuż uchwyty.

Ładowanie szczoteczki

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik ładowania zamigocze 10 razy, aby przypomnieć o ładowaniu.
- Podłącz szczoteczkę do zębów za pomocą kabla USB do dowolnego źródła zasilania, aby rozpocząć ładowanie; zaświeci się wskaźnik ładowania.
- Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zgaśnie, a ładowarka wyłączy się automatycznie, aby uniknąć problemów z nadmiernym ładowaniem.
- Przy pierwszym użyciu lub gdy szczoteczka nie jest używana przez dłuższy czas, normalne jest, że wskaźnik nie świeci się przez pierwsze 5 minut.

Specyfikacje

Źródło zasilania szczoteczki	DC3.7V
Materiał produktu	ABS/TPE
Włosie	Nylon
Zużycie energii szczoteczki	1.0W
Temperatura pracy	0-50°C

Środki ostrożności


- Nie należy demontować, naprawiać ani zmieniać produktu bez upoważnienia.
- Osoby z poważnymi chorobami przyzębia lub po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci, niemowlęta i osoby niezdolne do obsługi powinny być nadzorowane przez rodzica lub osobę dorosłą.
- Nie należy moczyć produktu w wodzie przez dłuższy czas.
- Nie należy umieszczać szczoteczki w wysokiej temperaturze lub wystawiać jej na działanie promieni słonecznych.
- Nie należy usilnie naciskać na włosie szczoteczki.

Instrukcja obsługi dziecięcej szczoteczki sonicznej Fairywill 2001

Opis produktu

- Częstotliwość wibracji: 38 000 razy na minutę.
- Zawiera 3 tryby (tryb niski, wysoki oraz masażu).
- Posiada właściwości antypoślizgowe oraz ergonomiczny kształt.
- Wodoodporność na poziomie IPX7.
- Akumulator NI-MH zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a jego pełne naładowanie umożliwi działanie produktu do 21 dni. Szczoteczka posiada wskaźnik niskiego poziomu akumulatora. W zestawie znajduje się przewód USB przeznaczony do ładowania produktu.
- Inteligentny timer będzie przypominał co 30 sekund o konieczności zmiany czyszczenia strefy jamy ustnej.
- Szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach, aby zachować dokładny czas szczotkowania.

Konstrukcja

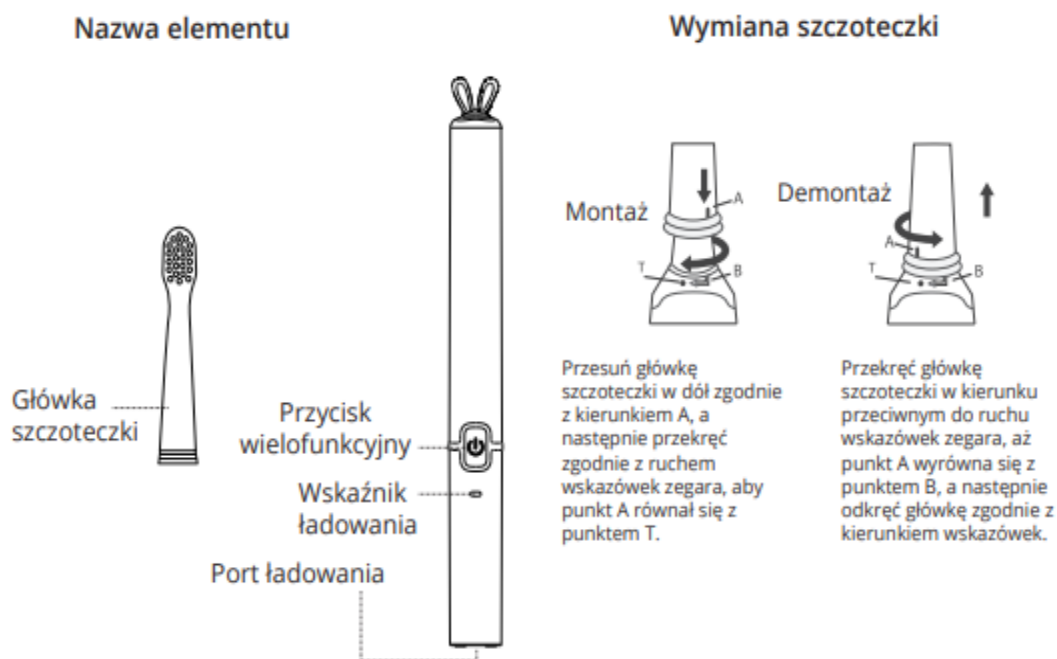

Ważne ostrzeżenia

- Podczas pierwszego użytkowania szczoteczki do zębów, możliwe jest odczuwanie drętwienia. Jest to normalne u osób używających szczoteczki po raz pierwszy. Uczucie to powinno zniknąć po kilku użyciach.
- Nie należy otwierać, naprawiać ani modyfikować produktu bez zasięgnięcia fachowej pomocy.
- Nie należy uderzać ani upuszczać produktu. Jeżeli produkt jest uszkodzony, należy zaprzestać jego używania.
- Przed ładowaniem, należy sprawdzić, czy produkt jest zgodny z lokalnym napięciem.
- Do tego produktu pasują tylko niektóre główki szczoteczek do zębów. - Przed użyciem skonsultuj się z dentystą, jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy poddałeś się zabiegowi chirurgicznemu w okolicy dziąseł lub w jamie ustnej.
- W przypadku wystąpienia krwawienia po użyciu szczoteczki lub jeśli krwawienie trwa dłużej niż tydzień, należy niezwłocznie skonsultować się z dentystą.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka.
- Dzieci powinny być nadzorowane podczas używania szczoteczki, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Należy trzymać szczoteczkę z dala od dzieci, gdy nie jest użytkowana.
- Nie należy wystawiać szczoteczki na działanie wysokiej temperatury lub promieni słonecznych.

Specyfikacje

Temperatura pracy	0-50°C
Napięcie robocze	DC1.2V
Włosie	Nylon
Napięcie wejściowe	DC5.0V
Moc wejściowa	0.6W
Moc robocza	0.55W
Czas ładowania	Do 6 godzin

Użytkowanie

- Podłącz produkt do źródła zasilania za pomocą kabla USB i naładuj produkt.
- Zamocuj główkę szczoteczki do uchwytu i upewnij się, że jest ona zablokowana we właściwym miejscu. Zwilż włosie szczoteczki i nałóż pastę do zębów.
- Delikatnie przyłóż główkę szczoteczki do zębów.
- Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach, szczotkując przednie i tylne powierzchnie oraz dziąsła przez 10 sekund.
- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć szczoteczkę i wyszczotkować każdą strefę jamy ustnej.
- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zmienić tryb pracy szczoteczki:
Tryb niski: Do łagodniejszego czyszczenia zębów, jamy ustnej i miejsc wrażliwych (wskaźnik w kolorze zielonym).
Tryb wysoki: Do skutecznego czyszczenia zębów (wskaźnik w kolorze czerwonym).
Tryb masażu: Do delikatnej stymulacji, w celu utrzymania zdrowych dziąseł (wskaźnik w kolorze niebieskim).
- Przesuń szczoteczkę do następnego obszaru, gdy timer przypomni o przerwie co 30 sekund. Po zakończeniu pracy na wszystkich 4 obszarach, szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach.

Ładowanie produktu

- Gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski, wskaźnik ładowania zaświeci się 10 razy.
- Podczas ładowania wskaźnik pozostanie czerwony. Po całkowitym naładowaniu, wskaźnik zmieni kolor na zielony. Gdy szczoteczka jest już w pełni naładowana, ładowarka wyłączy się, aby zapobiec przeładowaniu.
- W przypadku pierwszego użycia lub jeśli akumulator będzie rozładowany przez dłuższy czas, normalnym jest, że wskaźnik może nie świecić przez pierwsze 5 minut.