

VITAMMY®

babycinno

waga dla noworodków, niemowląt, dzieci i rodziców

ZE ZDEJMOWANĄ SZALKĄ

SBS-30322



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA


⚠ Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

WPROWADZENIE

Bardzo dziękujemy za wybór naszej cyfrowej wagi dla niemowląt. Przeczytaj instrukcję obsługi i ostrzeżenia przed pierwszym użyciem urządzenia. Zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i / lub uszkodzenia produktu podczas korzystania z niego. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.

Ta elektroniczna waga to domowe urządzenie przydatne dla wszystkich członków rodziny. Nadaje się do ważenia noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby produkt był najwyższej jakości, komfortowy dla dziecka, łatwy w użyciu i bezpieczny podczas ważenia.

OPIS URZĄDZENIA

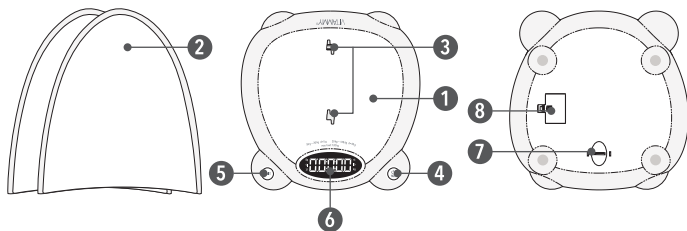


- | | |
|--|--|
| 1. Waga | 5. Przycisk zmiany jednostek UNIT |
| 2. Szalka dla noworodków i niemowląt | 6. Ekran LED |
| 3. Gniazda mocujące dla szalki | 7. Zabezpieczenie szalki |
| 4. Przycisk Włącz / Wylącz / Tara | 8. Komora baterii |

INSTRUKCJA OBSŁUGI


INSTALOWANIE BATERII

- △ Przed pierwszym użyciem należy zainstalować baterie.
1. Otwórz osłonę baterii i wyjmij izolator z komory baterii.
 2. Zainstaluj 3 baterie typu AAA (1,5 V) zgodnie z oznaczoną polaryzacją.
 3. Zamknij osłonę baterii.

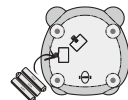


SZALKKA

- △ Do ważenia noworodka lub niemowlęcia użyj szalki.
1. Umieść obie części szalki w gniazdkach.
 2. Ułóż obie części równoległe do siebie, a następnie przesunij każdą z części w przeciwnym kierunku, tak by złączyły się w jedną szalkę.
 3. Zabezpiecz szalkę przed wypadnięciem naciskając zabezpieczenie na spodzie wagi.
 4. Kiedy nie potrzebujesz szalki, pociągnij zabezpieczenie na spodzie wagi, rozsunij obie części szalki, a następnie wyjmij je z gniazda wagi. Schowaj obie części w suchym miejscu.

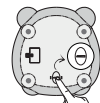

WAŻENIE NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT

1. Postaw wagę z zainstalowaną szalką na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
- △ Nie stawiaj wagi na miękkich powierzchniach takich jak dywan, czy wykładzina, ponieważ może to wpłynąć na wynik pomiaru.
2. Włącz wagę przyciskiem **Włącz / Wylącz / Tara**.
3. Kiedy na ekranie pojawią się same zera i jednostka wagi, można przystąpić do ważenia.
4. Jeśli chcesz zmienić jednostkę wagi, (kg / lb / st) naciśnij przycisk **UNIT**.
5. Jeśli chcesz obrócić zawartość ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **UNIT** przez ok. 2 sekundy.
6. Połóż dziecko na wadze. Wynik pojawi się na ekranie. Jeśli nie chcesz kłaść dziecka bezpośrednio na wadze, najpierw połóż na wadze ręcznik, naciśnij przycisk **Włącz / Wylącz / Tara**, by wyzerować wagę, a następnie połóż na wadze dziecko.

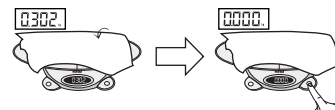

7. Wyłącz wagę, naciskając przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara** lub poczekaj, aż waga sama się wyłączy po 60 sekundach.
- △ Jeśli chcesz wykonać kolejny pomiar, po zdjęciu dziecka z wagi, wyzeruj wagę przed kolejnym ważeniem, naciskając przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara**.

WAŻENIE WIĘKSZYCH DZIECI I DOROSŁYCH

- Postaw wagę bez szalki na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
- △ Nie stawiaj wagi na miękkich powierzchniach takich jak dywan, czy wykładzina, ponieważ może to wpłynąć na wynik pomiaru.
- Włącz wagę przyciskiem **Włącz / Wyłącz / Tara**.
- Kiedy na ekranie pojawią się same zera i jednostka wagi można przystąpić do ważenia.
- Jeśli chcesz zmienić jednostkę wagi, (kg / lb / st) naciśnij przycisk **UNIT**.
- Jeśli chcesz obrócić zawartość ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **UNIT** przez ok. 2 sekundy.
- Stać na wadze i odczytaj wynik na ekranie.
- Wyłącz wagę naciskając, przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara** lub poczekaj, aż waga sama się wyłączy po 60 sekundach.



FUNKCJA AUTO LOCK

Kiedy dziecko leży na wadze niespokojnie, waga automatycznie ustabilizuje się i wyświetli wynik po trzykrotnym mignięciu cyfr na ekranie.

TAROWANIE

Wagą VITAMMY BABYCINNO można ważyć więcej niż jedno dziecko. Przed wykonaniem kolejnego pomiaru, należy zdjąć dziecko z wagi, nacisnąć przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara**, co wytaruje wagę, a następnie położyć na wadze kolejne dziecko.



ZMIANA JEDNOSTEK WAGI

Aby zmienić jednostkę wagi (kg / lb / st), naciśnij przycisk **UNIT**.



WSKAŹNIK PRZEKROCZENIA LIMITU WAGI

Jeśli ciężar dziecka przekracza maksimum dla tej wagi (120 kg), na ekranie pojawi się symbol „0-Ld”.



WSKAŹNIK NISKIEGO STANU BATERII

Waga zasignalizuje niski stan baterii poprzez wyświetlenie na ekranie symbolu „Lo”.



OSTRZEŻENIA

- △ W trakcie użytkowania wagę, należy umieścić na płaskiej, suchej, stabilnej i twardej powierzchni.
- △ Używaj tego urządzenia w domu, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- △ Nie przeciążaj wagi, maksymalne obciążenie to 120 kg.
- △ Unikaj potrząsania lub uderzania wagi.
- △ Nie zanurzaj wagi w wodzie.
- △ Podczas przechowywania nie kładź niczego na wadze.
- △ Optymalna temperatura do obsługi i przechowywania wagi wynosi od 5 do 40 °C.

SPECYFIKACJA

△ Wszelkie modyfikacje urządzenia są niedozwolone

MODEL	SBS-30322
MATERIAŁ OBUDOWY	ABS
TYP WYŚWIETLACZA	LED 90×26 mm
WYMIARY	650×320×88 mm
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	Waga, instrukcja, 3 baterie typu AAA 1,5 V
TEMPERATURA DZIAŁANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU	5-40°C
CZUJNIKI	4 precyzyjne czujniki tensometryczne
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	120 kg
DOKŁADNOŚĆ	Przy obciążeniu <20 kg d=5 g, w przedziale 20~120 kg d=50 g
ZASILANIE	3 baterie typu AAA 1,5V

GWARANCJA

URZĄDZENIE: VITAMMY babycinno (model SBS-30322)

GWARANT: Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

WSPARCIE TECHNICZNE: INFOLINIA – TEL. 887 11 00 66 E-MAIL: POMOC@NOVAMED.PL

GWARANCJA: Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie.

W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.

TYP GWARANCJI: Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z owrotem do Nabywcy.

OKRES GWARANCJI: 24 miesięcy na urządzenie. Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie.

BIEG OKRESU GWARANCJI: Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

OBZAR OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI: Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności

uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI: W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI:

- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
 - niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
 - ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
 - przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, niewłaściwego zasilania, itp.)
- Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
- Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

Pieczęć i podpis sprzedawcy
klienta

Data

Podpis

**UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ**



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Produkt posiada certyfikat CE



INFORMACJE KONTAKTOWE**PRODUCENT:****AEMAXX CO.,LTD**

4F, Building A, Donghu Industrial Park, No61, Dongpu Er Road, Tianhe District, Guangzhou, People's Republic of China

DYSTRYBUTOR:**NOVAMEDPL****Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.**

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach / Made in China

Wersja instrukcji: 01.02 / 26.04.2021