



Szczoteczka soniczna do zębów
FairyWill 507

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór urządzenia Fairywill 507. Przed użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Funkcje produktu

- Wibracje: soniczne, ponad 40 000 uderzeń na minutę.
- 5 trybów pracy: White, Clean, Sensitive, Polish i Massage.
- Specjalna konstrukcja włosia w kształcie fali umożliwia dokładne wyczyszczenie dziąseł oraz trudno dostępnych miejsc.
- 2-minutowy timer przypominający o upływie czasu czyszczenia co 30 sekund.
- Produkt posiada wymienne główki szczoteczki.
- Produkt posiada klasę wodoodporności na poziomie IPX7.
- Ładowanie urządzenia odbywa się za pomocą portu USB.
- Jednorazowe, pełne naładowanie akumulatora wystarcza na około 30 dni użytkowania.

Opis produktu

- ① Głowica szczoteczki
- ② Przycisk zasilający
- ③ Tryb White
- ④ Tryb Clean
- ⑤ Tryb Sensitive
- ⑥ Tryb Polish
- ⑦ Tryb Massage
- ⑧ Dioda ładowania
- ⑨ Port ładowania



Użytkowanie produktu

Obsługa szczoteczki

Załóż główkę szczoteczki i upewnij się, że jest ona prawidłowo zablokowana. Wybierz swój preferowany tryb, naciskając przycisk zasilający. Możesz przełączać się pomiędzy 5 trybami: "White, Clean, Sensitive, Polish i Massage" poprzez ciągłe naciskanie przycisku.



Zwilż główkę szczoteczki wodą i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów. Umieść główkę szczoteczki przy zębach pod lekkim kątem w kierunku linii dziąseł. Naciśnij przycisk zasilający, aby włączyć urządzenie.

Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po całym uzębieniu. Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na zęby ani przykładać włosia do jednego obszaru przez dłuższy czas. Szczotkuj zęby przez 2 minuty. Po każdym 30 sekundach włączy się timer. Szczoteczka automatycznie wyłączy się po 2 minutach.

Aby uniknąć zabrudzeń pastą do zębów, uruchamiaj szczoteczkę dopiero po przyłożeniu jej do zębów oraz wyłączaj ją przed wyciągnięciem z jamy ustnej.

Wymiana główki szczoteczki do zębów

- Montaż główki: Nałóż główkę szczoteczki na uchwyt, a następnie przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z punktem T.
- Demontaż główki: Przekręć główkę szczoteczki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z punktem B. Następnie wyciągnij ją wzdłuż uchwytu.

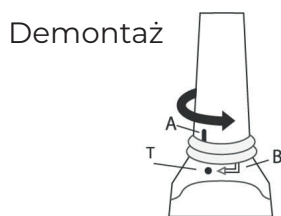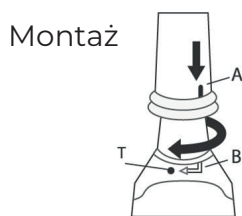

Ładowanie szczoteczki

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, dioda ładowania zaświeci się 10 razy, aby przypomnieć o ładowaniu.

Podłącz szczoteczkę do zębów za pomocą kabla USB do dowolnego źródła zasilania, aby rozpocząć ładowanie. Po prawidłowym podłączeniu, dioda ładowania powinna się włączyć.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, dioda wyłączy się automatycznie, a ładowarka przestanie ładować, aby uniknąć przeładowania.

Przy pierwszym użytkowaniu lub gdy szczoteczka nie jest obsługiwana przez dłuższy czas, dioda może nie włączać się przez pierwsze 5 minut.

Specyfikacja

Źródło zasilania: DC3.7 V

Materiał: ABS/TPE

Włosie: Nylon

Pobór mocy: 1.0 W

Temperatura pracy: 0-50°C

Środki bezpieczeństwa

Nie należy demontować, naprawiać ani ingerować w urządzenie bez upoważnienia.

Osoby z poważnymi chorobami uzębienia lub po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Dzieci, niemowlęta i osoby niezdolne do obsługi urządzenia powinny być nadzorowane przez rodzica lub osobę dorosłą.

Nie należy moczyć produktu w wodzie przez dłuższy czas.

Nie należy umieszczać szczoteczki w wysokiej temperaturze lub wystawiać jej na działanie promieni słonecznych.

Nie należy mocno dociskać włosia do zębów lub dziąseł.