

RENPHO

Instrukcja obsługi

MASAŻER DO STÓP

Model: RF-FM059R/RF-FM059

Wejście: 12V=2.5A

Moc znamionowa: 30W

Obszar grzewczy: dolny

Czas: 15min/30min

Materiał: ABS + tkanina Lycra

Temperatura grzania: Nadmuch

50°C/122°F

Kolor: Czarny/ Srebrny/ Biały



Dystrybutor w Polsce:

BRANDBOOK SERVICES SP. Z O.O. SP. K.
ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa
NIP: 6751735834 KRS: 000086023

INSTRUKCJA OBSŁUGI
↓

RENPHO

Dziękujemy za zakup masażera do stóp RENPHO.

Masażer oferuje mocny masaż. Korzystając z masażera, należy używać go z zachowaniem ostrożności i bezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć szkód materialnych, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i używanie zgodnie ze wskazówkami. Niestosowanie się do zaleceń może spowodować poważne obrażenia lub poważne szkody materialne.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIE używaj tego produktu jako substytutu opieki medycznej.

NIE używaj tego produktu przez więcej niż 30 minut jednorazowo. Pomiędzy kolejnymi użyciami należy pozostawić co najmniej 30 minut przerwy. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia żywotności produktu.

Używanie masażera bez nadzoru przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne.

Ten produkt nie może być używany przez dzieci poniżej 9 roku życia. Urządzenie nie może być używane przez osoby nadwrażliwe na ciepło oraz inne osoby, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie w przypadku korzystania z funkcji Heat.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego. Jest przeznaczony jedynie do zapewnienia komfortowego masażu.

Jeśli masz jakiegokolwiek obawy dotyczącego swojego zdrowia, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem. Osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu.

W przypadku ciąży, cukrzycy należy skonsultować się z lekarzem.

Masaż powinien być przyjemny i komfortowy. W przypadku pojawienia się bólu lub dyskomfortu, lub gdy ból mięśni lub stawów utrzymuje się przez dłuższy czas, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Nigdy nie używaj masażera na otwartych ranach, przebarwionych miejscach, miejscach o słabym krążeniu lub jakichkolwiek obszarach ciała, które są spuchnięte, poparzone.

NIE używaj urządzenia będąc pod wpływem alkoholu, środków nasennych lub uspokajających.

Normalnym zjawiskiem jest uczucie swędzenia, mrowienia lub zaczerwienienia na obszarze skóry, na którym masażer był używany po użyciu. Objawy te wkrótce znikną. Jeśli jednak objawy te utrzymują się przez dłuższy czas, sugerujemy konsultację z lekarzem.

Aby zapobiec powstawaniu siniaków, nie należy zbyt mocno naciskać na urządzenie.

NIE zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane lub podłączone do prądu. Należy zadbać o to, aby dzieci nie mogły dotykać urządzenia, gdy jest ono używane, oraz upewnić się, że nie mogą dosięgnąć i pociągnąć za przewód zasilający.

Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia, przewodu lub zasilacza w wodzie lub innych płynach.

NIE WOLNO używać ani przechowywać produktu w pobliżu zlewów, wanien lub pryszniców zawierających wodę lub w pobliżu bieżącej wody.

Nie używać w wannie, pod prysznicem, w spa, w basenie itp.

Zawsze po użyciu należy odłączyć zasilacz od punktu zasilania.

NIE UŻYWAJ tego urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub jakkolwiek część urządzenia (w tym przewód lub adapter zasilania) została uszkodzona.

Stosowanie akcesoriów nieprzeznaczonych do użytku z tym urządzeniem może spowodować obrażenia ciała u użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.

NIE WOLNO umieszczać tego urządzenia na innych urządzeniach, na nierównych powierzchniach lub w miejscach, w których mogłoby być narażone na działanie źródeł ciepła (np. grzejników lub pieców), bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernego kurzu.

Tego urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych ani umieszczać w nagrzanym piekarniku.

Urządzenie powinno być zawsze wyłączone przed odłączeniem od zasilania. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć zasilacz od urządzenia lub punktu zasilania. Chwyć za korpus wtyczki / adaptera.

W tym urządzeniu nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

Jeśli urządzenie ma być używane przez osobę trzecią, należy dostarczyć jej instrukcję obsługi.

Upewnij się, że dzieci i niemowlęta nie bawią się plastikowymi torbami lub jakimkolwiek materiałem opakowaniowym.

NIE należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub mokrymi stopami, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

NIE WOLNO przenosić urządzenia za przewód zasilający.

NIE używaj urządzenia podczas snu lub w przypadku uczucia senności.

NIE należy używać tego produktu przed snem. Masażer ma działanie pobudzające i może opóźnić sen.

NIE używaj tego produktu podczas snu.

NIE używaj maszyn ani ciężkiego sprzętu podczas korzystania z tego urządzenia.

NIE przykrywaj urządzenia podczas użytkowania. Produkt ulegnie przegrzaniu i może spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie mienia lub obrażenia osób.

Dłuższe stosowanie Heat może spowodować oparzenia skóry.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez ludzi. Nie jest przeznaczone dla zwierząt domowych

Nigdy nie sięgaj ani nie dotykaj urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć od sieci elektrycznej.

Przewód zasilacza należy umieścić w taki sposób, aby nie można było po nim chodzić, potknąć się o niego lub przygnieść przez przedmioty umieszczone na nim lub obok niego.

NIE należy przechowywać ani używać urządzenia w pobliżu lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Jeśli zasilacz lub przewód zasilający zasilacza jest uszkodzony, nie należy go używać. Należy go zutylizować, aby uniknąć zagrożenia.

TYLKO do użytku domowego w pomieszczeniach. Użytkowanie przemysłowe lub komercyjne unieważnia gwarancję.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji lub innego niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem.

Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa związane z wtyczką i przewodem zasilającym

W przypadku korzystania z przedłużacza: Parametry techniczne przedłużacza muszą odpowiadać lub przewyższać parametry techniczne tego urządzenia.

Nie wolno dopuścić, aby przewód zwisał nad krawędzią powierzchni roboczej lub stykał się z piecami lub innymi gorącymi powierzchniami.

Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie należy ich używać.

Ostrzeżenie

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 9 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

O MASAŻERZE DO STÓP RENPHO

1. Specyfikacja

Model: RF-FM059R/ RF-FM059

Wejście: 12V=2.5A

Moc znamionowa: 30W

Obszar grzewczy: dolny

Czas: 15min/30min

Materiał: ABS + tkanina Lycra

Temperatura grzania: Nadmuchiwanie
50°C/122°F

Kolor: Czarny/ Srebrny/ Biały

2. Zawartość pudełka

Masażer stóp Renpho

Pilot (**wyłącznie w wersji RF-FM059R**)

Adapter

Instrukcja obsługi

3. Wprowadzenie do produktu



4. Funkcje



Time: Wybierz 15 lub 30 minutowe automatyczne wyłączenie.

Knead Intensity (Intensywność ugniatania): Wybierz intensywność ugniatania spośród niskiej (L), średniej (M), wysokiej (H) lub OFF (wyłączonej).

Air Intensity (intensywność powietrza): Wybierz intensywność ciśnienia powietrza spośród niskiej (L), średniej (M), wysokiej (H) lub wyłączonej

Heat: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania.

KORZYSTANIE Z MASAŻERA DO STÓP RENPHO

Korzystanie z masażu stóp przez 15 lub 30 minut raz lub dwa razy dziennie może złagodzić ból mięśni, poprawić krążenie krwi i skutecznie poprawić objawy bezsenności. Zalecamy jednak ograniczenie masażu do 15–30 minut. Dłuższy czas masażu może spowodować łagodny ból.

1. Podłączyć wtyczkę do źródła zasilania. Wskaźnik Power powinien migać, a masażer jest w stanie gotowości.
2. Przed użyciem proszę usunąć folię ochronną z panelu dotykowego. Naciśnij przycisk zasilania. Intensywność ugniatania i powietrza będzie na domyślnym niskim poziomie (L). Domyślne automatyczne wyłączenie będzie trwało 15 minut, a wskaźnik będzie świecił na czerwono.
3. Naciśnij przycisk Time, aby zmienić automatyczne wyłączenie na 30 minut, a lampka kontrolna zmieni kolor na niebieski.
4. Naciśnij przyciski Knead Intensity i Air Intensity, aby dostosować intensywność ugniatania i ciśnienia powietrza (L, M, H, OFF).
5. Naciśnij przycisk Heat, aby włączyć/ wyłączyć funkcję ogrzewania.
Uwaga: Funkcja ogrzewania nie może działać samodzielnie. Funkcje ciśnienia powietrza i ugniatania mogą działać niezależnie. Funkcja ogrzewania może działać tylko wtedy, gdy działa masaż ciśnieniowy i/lub ugniatający.
WSKAZÓWKI: Użyj kciuka do naciskania przycisków, aby uzyskać lepszą czułość dotyku.
6. Masażer stóp pasuje do stóp o maksymalnym rozmiarze 46
7. Aby zdjąć i wyprać pokrowiec stóp:




1



2



3

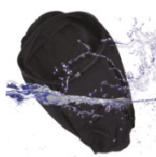

4

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU RENPHO

1. Zabronione jest stosowanie napięcia innego niż znamionowe (DC12V/2,5A).
2. Zabrania się naprawiania masażera lub wymiany jego części przez nieprofesjonalny personel.
3. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez dział konserwacji lub podobnie wykwalifikowane osoby zatwierdzone przez producenta, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
4. Nie należy go używać ani przechowywać w wilgotnym środowisku lub w wysokich temperaturach
5. Po użyciu odłącz zasilacz od gniazdka.
6. Upewnij się, że działanie tego produktu nie przekracza w danym momencie 30 minut.
7. Jeśli czujesz się źle lub odczuwasz dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie produktu.

8. Jeśli podczas używania produktu wystąpi wysoka temperatura lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast zaprzestać używania i odłączyć urządzenie od zasilania.
9. Każda osoba, która może być w ciąży lub niedawno urodziła dziecko, ma problemy z sercem lub rozrusznikiem serca, cierpi na cukrzycę lub inne zaburzenia sensoryczne, zapalenie żył i/lub zakrzepicę, dysfunkcje stawów, stany zapalne lub urazy, słabe kości, osteoporozę, wysoką gorączkę, nieprawidłowy lub skrzywiony kręgosłup, jest w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi, ma wszczepione w ciało szpilki/śruby/sztuczne stawy lub inne urządzenia medyczne, jest leczony z powodu schorzenia lub urazu fizycznego lub jest pod opieką lekarza, powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą przed użyciem urządzenia masującego przeznaczonego do użytku domowego.
10. Nie należy używać ostrych przedmiotów do obsługi produktu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
11. Prosimy o utrzymanie produktu w czystości. Do czyszczenia można użyć miękkiej bawełnianej szmatki i neutralnego detergentu.
12. Nie należy stać podczas korzystania z masażera. Nie należy umieszczać na urządzeniu zbyt ciężkich przedmiotów, aby uniknąć jego uszkodzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie działa	<p>Odlączone zasilanie lub luźna wtyczka powoduje słaby kontakt.</p> <p>Włęcznik zasilania jest włączony lub timer został zresetowany.</p> <p>Silnik włącza się automatycznie, gdy urządzenie jest włączone zbyt długo, aktywując zabezpieczenie przed przegraniem.</p>	<p>Podłączyć ponownie do źródła zasilania.</p> <p>Ponownie włączyć przełącznik zasilania.</p> <p>Masażera należy używać po naturalnym ostygnięciu silnika.</p>
Intensywność masażu jest zbyt wysoka lub zbyt niska	<p>Twoja stopa ustawiona jest pod złym kątem.</p> <p>Nie wybrałeś poziomu intensywności, który jest odpowiedni dla Ciebie.</p>	<p>Wyreguluj kąt kontaktu, aby uzyskać umiarkowaną intensywność.</p> <p>Masaż posiada 3 poziomy intensywności wybierz tryb, który preferujesz. Na początek polecamy tryb niski.</p>
Brak ogrzewania lub niewystarczające ogrzewanie	<p>Funkcja ogrzewania jest produkowana zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa standardów, co ogranicza szybkość nagrzewania się produktu. Dlatego nagrzewanie, może wydawać się może nieco powolne. 7-10 min zanim będzie można czuć oczywiste ciepło.</p>	<p>Jeśli naciśniesz pokrywę stopy, aby zobaczyć światło, ogrzewanie jest włączone normalnie. Szybkość ogrzewania jest związana z otoczeniem. Jeśli znajdujesz się zimnej okolicy, czas nagrzewania może być dłuższy.</p>
Panel dotykowy nie działa prawidłowo	<p>Plastikowa folia na panelu dotykowym nie jest usunięta.</p> <p>Palce są mokre.</p> <p>Niedostateczna powierzchnia dotykowa.</p>	<p>Przed użyciem usunąć folię z tworzywa sztucznego.</p> <p>Przed dotknięciem przycisku należy osuszyć palce.</p> <p>Do naciska przycisków używaj kciuka, aby uzyskać lepszą czułość na dotyk.</p>

GWARANCJA PRODUCENTA

Zakupiony przez Państwa produkt RENPHO objęty jest dwuletnią ograniczoną gwarancją producenta liczoną od daty dostawy.

Warunki gwarancji znajdują się na stronie: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do uzyskania gwarancji. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie rejestrować produktu, nie spowoduje to zmniejszenia gwarancji na produkt.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem bok@brandbook.services

W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów należy skontaktować się z nami podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.

Uwaga:

To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym, szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, podaj go odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z punktu zwrotu i odbioru odpadów elektronicznych lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Dystrybutor w Polsce:

BRANDBOOK SERVICES SP. Z O.O. SP. K.
ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa
NIP: 6751735834 KRS: 000086023



RENPHO

Time



Intensity



Power



Air Intensity



Heat



RENPHO

