

# **inFace**

Depilator laserowy IPL z chłodzeniem  
InFace ZH-18E

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## **FUNKCJE PRODUKTU**

- Kryształowy punkt zamrażania
- Bezpieczne, bezbolesne i skuteczne usuwania włosów

## **ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.

- Do ładowania produktu używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Nie należy stosować produktów pielęgnacyjnych zawierających olejki zapachowe przy stosowaniu produktu.
- Jeżeli wcześniej włoski zostały usunięte poprzez zastosowanie innych metod, należy poczekać aż odrosną.
- Regulacja poziomu energii waha się od słabego do silnego. Im wyższa energia, tym lepszy efekt. Osoby o ciemnej skórze powinny uważać aby nie stosować zbyt wysokiego poziomu energii produktu, aby nie doprowadzić do poparzeń skóry.
- Podczas użytkowania, jeśli włosy lub plamy przykleją się do plastiku na krawędzi rowka lampy błyskowej, spowoduje to, że ów plastik stanie się czarny lub powstaną na nim czarne plamy. Nie ma to jednak wpływu na normalne użytkowanie produktu.
- Produkt nie jest wodoodporny. Należy unikać stosowania go w pomieszczeniach typu łazienka lub w pobliżu miejsc zawierających wodę.
- Jeśli powłoka produktu lub głowica lampy ulegnie uszkodzeniu lub przypadkowo zanurzy się w wodzie, prosimy odesłać ją do producenta w celu naprawy.
- Jeśli wbudowany wentylator nie działa po włączeniu produktu (nie słychać dźwięku obracającego się wentylatora), nie należy go używać.
- Trzymaj ten produkt z dala od miejsc z silnym polem magnetycznym, wilgocią, silnym kurzem lub wysoką temperaturą.

## **ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

- Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj uderzania, ściskania lub innych sytuacji, które mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Demontaż oraz naprawa urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyko porażenia prądem.
- Zabrania się stosowania produktu dzieciom, kobietom w ciąży, osobom z bliznami, kobietom w okresie menstruacji, w okresie karmienia piersią.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia objawów żylaków lub rozszerzenia naczyń krwionośnych.
- Nie stosować przy objawach opryszczki zwykłej, zmianach skórnych, krwiakach.
- Nie zaleca się stosowania u pacjentów z powikłaniami spowodowanymi fotowrażliwością, hirsutyzmem i innymi chorobami.
- Zabronione jest stosowanie przez osoby z chorobami serca, cukrzycą, nadciśnieniem, nowotworami złośliwymi, zapaleniem mieszków włosowych, zakaźnymi chorobami skóry, poparzoną skórą, zaburzeniami antykoagulacyjnymi.
- Zabronione jest stosowanie leków nasennych i alkoholu.
- Zabronione jest stosowanie produktu podczas przyjmowania aspiryny lub środków immunosupresyjnych.
- Nie zaleca się stosowania osobom, które stosowały leki światłoczułe (takie jak, tetracyklina, sulfa itp.).
- Nie zaleca się stosowania produktu dla osób, które stosowały produkty wybielające lub zawierające witaminę A.
- Osoby, które w przeciągu 3 miesięcy przeszły radioterapię lub chemioterapię nie powinny stosować produktu.
- Jeżeli na skórze występują oparzenia słoneczne lub skóra była wyeksponowana na działanie promieni słonecznych w przeciągu ostatnich dwóch tygodni nie powinny stosować produktu.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Zabronione jest stosowanie w częściach intymnych (takich jak sutki, pochwa, odbyt i okoliczne części ciała).
- Nie należy stosować na częściach wrażliwych (takich jak okolice oczu, jabłko Adama, pępek itp.).
- Zabronione jest stosowanie w miejscach, w których wykonano operacje plastyczne, znamiona i tatuaże.
- Zabrania się stosowania w miejscach, w których występuje świąd, gorączka, ropne zapalenie i stany zapalne.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Depilator laserowy IPL z chłodzeniem x1

Zasilacz x1


Okulary ochronne x1

Maszynka do golenia x1

Instrukcja obsługi x1

Uwaga: Zarówno zdjęcia (ilustracje), jak i opis istotnych cech produktu zawartych w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.

## OPIS WYGLĄDU PRODUKTU

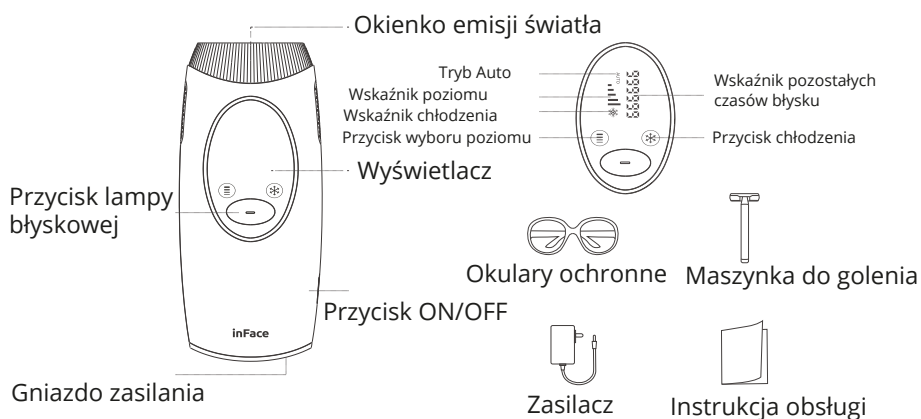

## PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa: Depilator laserowy IPL z chłodzeniem InFace

Model: ZH-18E

Moc znamionowa: 48W

Żywotność: 500.000 błysków

Temperatura chłodzenia: 13°C

Temperatura przechowywania: -20-70°C

Rozmiar produktu: 191 x 69 x 37mm

Napięcie wejściowe: 12V=

Długość fali: 530nm

Obszar emitujący światło: 3 cm<sup>2</sup>

Temperatura pracy: 0-40°C

Waga netto: Około 300g

## Zalecenia dotyczące cyklu użytkowania

Normalny i pełny cykl wzrostu włosów trwa 18-24 miesięcy. W tym okresie konieczne jest wielokrotne używanie urządzenia do usuwania włosów, aby uzyskać lepszy efekt depilacji. Efekt usuwania włosów różni się u poszczególnych osób, w zależności od koloru włosów na ciele oraz poziomu i częstotliwości używania urządzenia do usuwania włosów. Należy używać go kilka razy w zależności od stanu wzrostu włosów, aby osiągnąć efekt usuwania włosów w ciągu 8 tygodni.

1-2 tydzień, 3 razy w tygodniu, włoski zaczynają rosnąć wolno



3-4 tydzień, dwa razy w tygodniu, włoski stają się miękkie i cieńkie z wypadającymi czarnymi cebulkami



4-8 tydzień i więcej, dwa lub jeden raz w miesiącu, naturalne obkurczenie porów, włosy przestają rosnąć



# PRZED UŻYCIEM

## Kolor włosów



## Odcień skóry



- Przed pierwszym użyciem produktu upewnij się, że Twój kolor skóry i włosów mieści się w odpowiednim zakresie. Wykonaj test na małej powierzchni części, która wymaga depilacji. Jeśli po 12 godzinach nie wystąpi żadna niepożądana reakcja, możesz rozpocząć stosowanie produktu.
- Przed rozpoczęciem zabiegu depilacji należy oczyścić skórę, usunąć włosy (poniżej 1 mm) w obszarze, który ma być depilowany, upewnić się, że skóra jest całkowicie sucha i wolna od substancji oleistych (perfumy, balsam, balsam do ciała itp.), w przeciwnym razie może to spowodować ból lub zaczerwienienie skóry i tym samym wpłynąć na jakość zabiegu.
- Przy pierwszym użyciu należy wykonywać zabieg na pierwszym poziomie. Jeżeli nie wystąpi ból lub inne niepożądane działanie można zmieniać poziomy w zależności od zapotrzebowania.
- Należy pamiętać, aby nie napromieniować tego samego obszaru wielokrotnie.
- Należy zwracać szczególną uwagę, aby nie kierować światłem laserowym w kierunku zarówno swoich, jak i innych osób oczu, aby uniknąć dyskomfortu lub zagrożenia dla wzroku.
- Przed rozpoczęciem zabiegu nałóż okulary ochronne.
- Podłącz produkt do zasilacza a następnie do gniazdka elektrycznego.

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- Kiedy produkt jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy aby go włączyć. Produkt ustawiony jest domyślnie na poziom 1.
- Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania pozwala na cykliczne przełączanie się pomiędzy kolejnymi poziomami: 1-2-2-4-5-4-3-2-1.
- Krótkie naciśnięcie przycisku trybu chłodzenia pozwala na przełączanie się pomiędzy trybem chłodzenia a trybem normalnym
- Po włączeniu zasilania domyślnie ustawiony jest tryb ręczny. Aby wybrać tryb automatyczny należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk lampy błyskowej. W trybie automatycznym, gdy okienko emisji światła znajduje się blisko skóry, może migać w sposób ciągły w celu usunięcia włosów.
- Jeżeli chcesz wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy przycisk zasilania.
- Pamiętaj aby dostosować odpowiedni poziom. Zaleca się stosowanie od czasu do czasu trybu chłodzenia, aby zapewnić jak najwyższy komfort użytkownika.
- Produkt należy trzymać w pozycji pionowej względem depilowanego obszaru z okienkiem emisji światła blisko skóry.

## **PO UŻYCIU:**

- Produkt działa na zasadzie plug-and use i nie wymaga ładowania. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć go i odłączyć od zasilania oraz umieścić w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Do czyszczenia okienka emisyjnego światła należy użyć wacika lub bezpyłowej szmateczki namoczonej niewielką ilością alkoholu medycznego. Zabronione jest bezpośrednio rozpylanie lub polewanie alkoholem.
- Po wykonaniu zabiegu należy pamiętać o odpowiednim nawilżeniu skóry, nie wolno stosować perfum ani produktów do peelingu ciała na obszarze, który został poddany depilacji.
- Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV w ciągu 48 godzin oraz zanurzania w wodzie w ciągu 6 godzin.

## **PO UŻYCIU:**

- Po użyciu, objawy takie jak zaczerwienienie lub swędzenie mogą się pojawić i jest to zjawisko całkowicie normalne. Należy pozwolić, aby skóra sama się zregenerowała.

## **ROZWIĄZYWANIE PROBLMEÓW:**

Problem: Produkt nie włącza się.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy zasilacz oraz gniazdko elektryczne nie są uszkodzone oraz czy zasilacz jest podłączony w prawidłowy sposób.

Problem: Zasilacz nagrzewa się.

Rozwiązanie: Jest to zjawisko całkowicie normalne.

Problem: Na boku okienka emisji światła pojawiają się plamy.

Rozwiązanie: Włosy nie zostały zgolone przed rozpoczęciem użytkowania, co powoduje, że pozostają one na głowicy lampy błyskowej i powodują plamy. Do wyczyszczenia można użyć wacika lub szmateczki nasączonych alkoholem medycznym. Czyszczenie powinno odbywać się regularnie, aby zapewnić czystość produktu.

Problem: Niezadawalające efekty zabiegu.

Rozwiązanie: Przez rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi. Pamiętaj o dostosowaniu poziomu do swoich potrzeb lub zwiększeniu częstotliwości stosowania produktu zachowując wszystkie środki ostrożności.

Problem: Brak emisji światła w trakcie użytkowania.

Rozwiązanie: Należy pamiętać aby trzymać produkt w prawidłowy sposób, tj. głowica lampy błyskowej musi być skierowana pionowo względem obszaru depilowanego.



## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:**

Problem: Skóra staje się wrażliwa podczas stosowania produktu.

Rozwiązanie: Przy pierwszym użyciu pamiętaj, aby zastosować poziom pierwszy i zmieniać go w zależności od potrzeb, gdy skóra przyzwyczai się do tego rodzaju depilacji. Sprawdź także czy produkt, a zwłaszcza okienko emisji światła nie są uszkodzone.

Problem: Podczas użytkowania wyczuwalny jest specyficzny zapach.

Rozwiązanie: Zapach można wyeliminować poprzez wyczyszczenie okienka emisji światła. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu produktu. Sprawdź, czy włosy zostały prawidłowo ogolone przed rozpoczęciem zabiegu depilacji, gdyż ich obecność może powodować wytwarzanie się specyficznego zapachu podczas depilacji.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.