


SKG

Neck Massager
N5-E

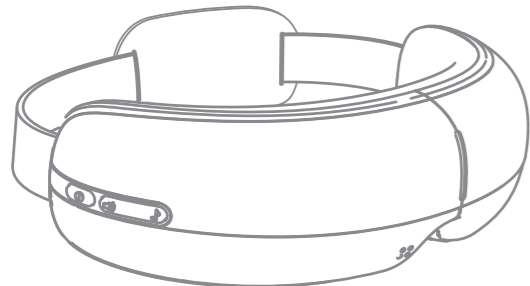

Manual

E3-EN Instrukcja obsługi

Ze względu na indywidualną wrażliwość skóry każdej osoby, aby uniknąć dyskomfortu, proszę zwrócić uwagę na właściwy dobór ustawień urządzenia. Użycie funkcji gorącego kompresu zastosowane przez długi czas może spowodować uszkodzenie skóry i oparzenia niskotemperaturowe. Zaleca się korzystanie z funkcji gorącego kompresu w odpowiednim odstępie czasu po użyciu.

Ładowanie

1. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, pojawi się komunikat głosowy "Please charge if the battery is low". Proszę odsłonić interfejs ładowania i włożyć kabel USB.
2. Podczas ładowania, czerwona lampka kontrolna jest włączona. Po pełnym naładowaniu lampka kontrolna zaświeci się na zielono.
3. W trakcie ładowania urządzenia, nie jest możliwe uruchomienie produktu.
4. Masażer posiada wbudowany akumulator, którego czas ładowania wynosi 3-5 godzin.

Tryby ładowania

Tryby ładowania	Komputerowy interfejs USB
	Mobilna stacja ładowania
	Standardowa wtyczka zasilania 5V 1A (zalecana)

Czas użycia

Domyślny czas pracy to 15 minut. Aby wydłużyć czas użytkowania, należy uruchomić masażer ponownie.

Sposób użycia

1. Włączenie masażera następuje przez wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku "ⓘ". Włączenie urządzenia zostanie potwierdzone komunikatem głosowym "Hi, SKG". Krótkie naciśnięcie przycisku "ⓘ", powoduje przełączenie trybów pracy masażera. Urządzenie posiada pięć trybów:

- Tryb aktywny:** ciśnienie powietrza + wibracja + gorący kompres + muzyka
- Tryb kojący:** ciśnienie powietrza + gorący kompres + muzyka
- Tryb pielęgnacji oczu:** ciśnienie powietrza + wibracja + muzyka
- Tryb snu:** gorący kompres + muzyka
- Tryb relaksacyjny:** ciśnienie powietrza + muzyka

Po 15 minutach pracy, masażer automatycznie wyłączy się, potwierdzając to komunikatem głosowym " Thanks for using, goodbye".

2. Domyślnym poziomem głośności z jakim masażer się uruchamia jest poziom 3. Aby zmienić natężenie dźwięku urządzenia na jeden z 5 poziomów, należy krótko nacisnąć przycisk „⏮”. Sekwencyjne naciskanie przycisku przełącza poziomy na 3-4-5-off(wyłączony)-1-2-3...

3. Muzyka z urządzenia i Bluetooth włączane są domyślnie po uruchomieniu.

4. Nazwa Bluetooth masażera to "SKG E3-EN". Przy pierwszym użyciu, należy połączyć masażer ze sprzętem audio z Bluetooth. Gdy połączenie Bluetooth zostanie aktywowane, pojawi się komunikat głosowy "Bluetooth is connected". Kiedy połączenie Bluetooth zostanie rozłączone, pojawi się komunikat „Bluetooth is disconnected”.

5. Przed użyciem masażera, należy zdjąć soczewki kontaktowe i spinki do włosów, następnie wyregulować elastyczny pasek i ustawić urządzenie w najbardziej wygodnej pozycji.

Codziennie utrzymanie

- Należy używać czystej wody i wilgotnej szmatki do przetarcia brudnej powierzchni masażera. Nie należy używać alkoholu i innych lotnych płynów do wycierania. Produkt nie może być rozmontowywany, ani wkładany do wody w celu umycia.
- W przypadku długotrwałej bezczynności urządzenia, produkt należy przykryć aby chronić go przed kurzem.
- Podczas procesu czyszczenia, w celu uniknięcia zwarcia, należy zapobiegać przedostawaniu się do urządzenia wody lub innych płynów do urządzenia.

Środki ostrożności

⚠ Uwaga

• Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

• Nie należy używać produktu po nałożeniu makijażu, ponieważ produkt może zepsuć makijaż, a kosmetyki mogą zanieczyścić powierzchnię produktu. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni produktu należy przetrzeć ją wilgotną szmatką.

⚠ Ostrzeżenie

- Nie należy używać masażera oczu podczas jazdy samochodem.
- Nie należy używać masażera w miejscach narażonych na zbyt wysoką temperaturę lub nadmierną wilgotność.
- Nie należy używać produktu przez osoby cierpiące na udar mózgu, wysokie ciśnienie krwi i niskie ciśnienie krwi.

• Nie należy używać produktu przez osoby cierpiące na choroby oczu, takie jak jaskra, zaćma.

• Nie należy stosować masażera do oczu po spożyciu alkoholu.

• Pacjenci, którzy mieli operację oczu i choroby serca a nie powinni używać produktu.

• Przed użyciem produktu należy upewnić się, że na oczach nie ma założonych soczewek kontaktowych i że usunięte są wszystkie spinki i akcesoria do włosów.

• Produkt jest produktem do masażu osobistego i nie może zastąpić leków i urządzeń medycznych.

• Dzieci, kobiety w ciąży, kobiety w okresie menstruacji nie mogą używać masażera do oczu.

• Ponieważ produkt zawiera baterię litową, nie należy umieszczać go w środowisku o wysokiej temperaturze.

• Osoby z wrażliwą skórą, alergicznym zapaleniem skóry twarzy, sztucznymi substancjami w twarzy powinni używać produktu pod nadzorem lekarza.

• Produkt w trakcie używania może być podgrzany. Użytkownicy, którzy nie są wrażliwi na ciepło, powinni zachować ostrożność podczas korzystania z niego.

• W przypadku wystąpienia dyskomfortu, należy natychmiast przerwać używanie produktu.

• Nie należy masować produktem innych części ciała niż okolice oczu.

• Nie wolno demontować produktu bez upoważnienia.