

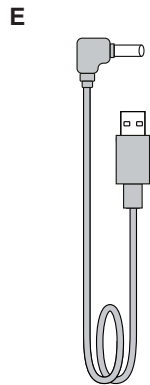
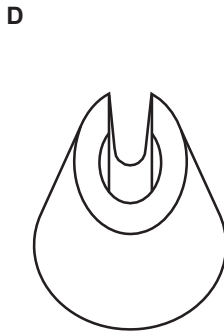
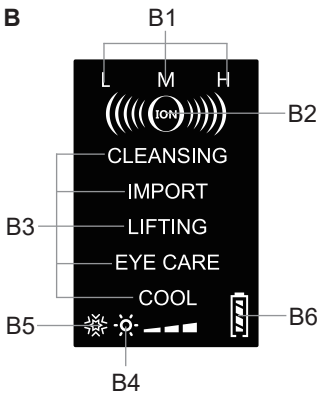








| | | |
|---|-----------|--------------|
| Galvanická žehlička na pleť • NÁVOD K OBSLUZE | CZ | 5-10 |
| Galvanická žehlička na pleť • NÁVOD NA OBSLUHU | SK | 11-16 |
| Galvanic skin iron • USER MANUAL | EN | 17-22 |
| Galvanikus bőrvasaló • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | HU | 23-28 |
| Żelazko galwaniczne do cery • INSTRUKCJA OBSŁUGI | PL | 29-34 |
| Galvanisches Hautbügeleisen • BEDIENUNGSANLEITUNG | DE | 35-41 |

Fenité

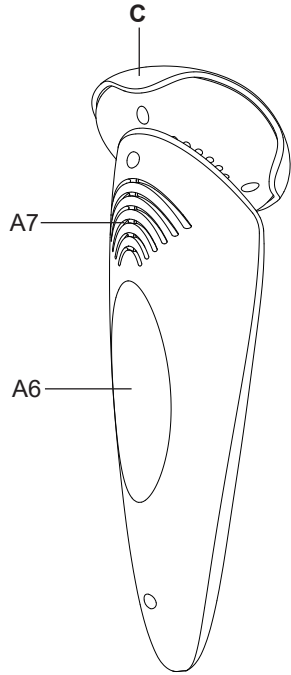

1

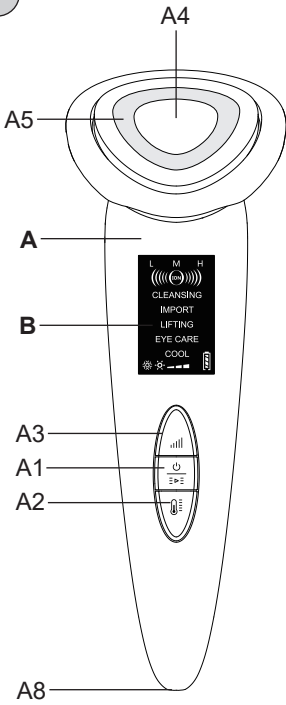

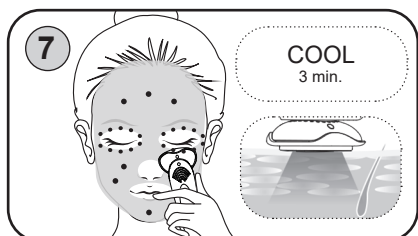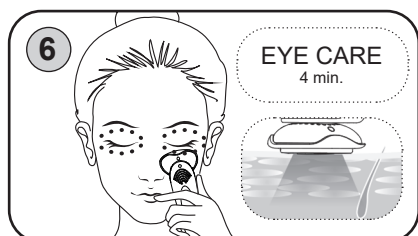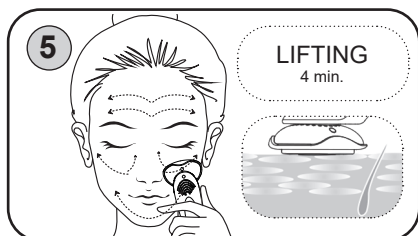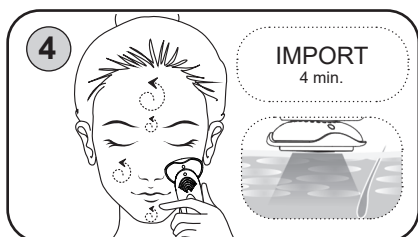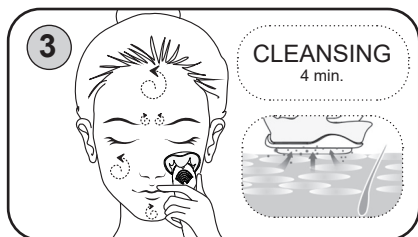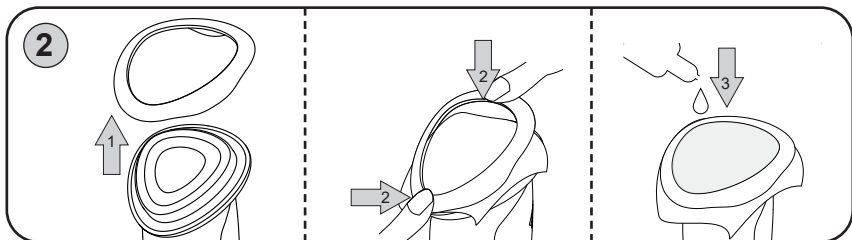

| | | |
|-----------|---|----|
| CZ | I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ | 5 |
| | II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1) | 7 |
| | III. POKYNY K OBSLUZE | 7 |
| | IV. ÚDRŽBA | 9 |
| | V. EKOLOGIE | 10 |
| | VI. TECHNICKÁ DATA | 10 |
| SK | I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA | 11 |
| | II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1) | 13 |
| | III. POKYNY K OBSLUZE | 13 |
| | IV. ÚDRŽBA | 15 |
| | V. EKOLÓGIA | 16 |
| | VI. TECHNICKÉ ÚDAJE | 16 |
| EN | I. SAFETY WARNING | 17 |
| | II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1) | 19 |
| | III. INSTRUCTIONS FOR USE | 19 |
| | IV. MAINTENANCE | 21 |
| | V. ENVIRONMENT | 22 |
| | VI. TECHNICAL DATA | 22 |
| HU | I. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK | 23 |
| | II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) | 25 |
| | III. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK | 25 |
| | IV. KARBANTARTÁS | 28 |
| | V. ÖKOLÓGIA | 28 |
| | VI. MŰSZAKI ADATOK | 28 |
| PL | I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | 29 |
| | II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1) | 31 |
| | III. INSTRUKCJE DOT. OBSŁUGI | 31 |
| | IV. KONSERWACJA | 34 |
| | V. EKOLOGIA | 34 |
| | VI. DANE TECHNICZNE | 34 |
| DE | I. SICHERHEITSANWEISUNGEN | 35 |
| | II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1) | 37 |
| | III. BEDIENUNGSANWEISUNGEN | 38 |
| | IV. WARTUNG | 40 |
| | V. UMWELTSCHUTZ | 40 |
| | VI. TECHNISCHE DATEN | 40 |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Instrukcje zawarte w podręczniku należy uważać za część urządzenia i przekazać każdemu innemu użytkownikowi urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i podobnego! Nie jest przeznaczone do wykorzystania w salonie piękności lub innego wykorzystania komercyjnego!
- **Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.**
- **Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!**
- **Przy manipulowaniu z urządzeniem należy postępować w taki sposób, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.**
- **Nigdy nie używać urządzenia, gdy nie działa prawidłowo, jeśli spadło na ziemię i zostało uszkodzone.**
- Urządzenie należy chronić przed kurzem, chemikaliami, nadmierną wilgocią, dużymi zmianami temperatury i nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych.
- Przed użyciem zdjąć wszystkie metalowe przedmioty i ozdoby (np.: okulary, zegarek, kolczyki, bransolety, pierścionki, itp.).
- Urządzenia ani akcesoriów nie wkładać do wszelkich cielesnych otworów.
- Nigdy nie używaj urządzenia do innego celu niż ten, do którego jest przeznaczone i opisane w niniejszej instrukcji!
- Używaj urządzenia wyłącznie z akcesoriami przeznaczonymi dla tego typu. Korzystanie z akcesoriów niezatwierdzonych może spowodować obrażenia.
- To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić.
- To urządzenie ma ogrzewaną powierzchnię, osoby nie odczuwające ciepła muszą być ostrożne używając tego urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** W przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia, które nie jest zgodne z instrukcją, istnieje ryzyko zranienia.
- Teksty w języku obcym i rysunki pojawiające się na opakowaniu lub produkcie są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu niniejszej mutacji językowej.
- Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego posługiwania się urządzeniem (np. zranienia, urazy na zdrowiu) i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku niezastosowania się do powyższych środków ostrożności. Używanie tego urządzenia nie zastępuje opieki lekarskiej.
- Nie należy używać urządzenia do skóry wrażliwej, uszkodzonej lub z wypryskami (takiej jak świeże blizny, różnie rany, oparzenia, zaczerwienienie, obrzęk twarzy, choroby skóry...).

- W razie odczuwania bólu lub innych nieprzyjemnych odczuć, lub wystąpienia jakichkolwiek innych problemów zdrowotnych należy natychmiast wyłączyć urządzenie i konsultować jego dalsze użycie ze swoim lekarzem lub dermatologiem.
- Nie używać urządzenia w przypadku posiadania metalowych implantów, metalowych aparatów ortodontycznych, piercingu, lub rozrusznika serca.
- Jeżeli użytkownik ma któres z podanych poniżej przeciwwskazań, użycie urządzenia powinien konsultować ze swoim lekarzem: ciąża, karmienie piersią, alergia, zaburzenia krzepliwości krwi, zażywanie leków wrażliwych na światło, lub jakaś przewlekła choroba.
- Urządzenia nie stosuje się do leczenia objawów chorobowych skóry. Korzystanie z urządzenia skonsultować można z lekarzem.
- Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci, osoby niekompetentne lub osoby, które nie są w stanie wyrazić swoich uczuć.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie i adapter muszą być przechowywane z dala od dzieci.
- Urządzenie nie ma własnego źródła ładowania, jest zaprojektowane do ładowania tylko ze źródła USB (zasilacz z wyjściem USB, komputer z wyjściem USB, z napięciem wyjściowym 5,0 V i prądem wyjściowym, co najmniej 1000 mA), przed podłączeniem należy zapoznać się z instrukcjami producenta tych źródeł ładowania.
- Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym zasilaczem, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, spadło na ziemię i zostało uszkodzone lub wpadło do wody. W takich przypadkach należy zanieść urządzenie do specjalistycznego serwisu, aby zweryfikować jego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zalecamy zainstalowanie do obwodu elektrycznego w łazience wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem zadziałania nie większym niż 30 mA. Skonsultuj się z technikiem rewizyjnym lub elektrykiem.
- Urządzenie musi być zasilane tylko bezpiecznym małym napięciem odpowiadającym oznaczeniu urządzenia.
- Urządzenie z dołączonym adapterem nie może być stosowane w miejscach, gdzie może spaść do wanny, zlewu lub basenu. Jeżeli urządzenie wpadło do wody, nie należy go wyciągać! Po pierwsze, należy odłączyć zasilacz od sieci, dopiero potem wyjąć. W takich przypadkach potrzeba odnieść urządzenie do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.

– Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po użyciu musi być odłączone od sieci przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Urządzenie znajdujące się w pobliżu wody stanowi zagrożenie, nawet wtedy, gdy jest wyłączone.

- Zasilacza nie podłączać do gniazdka elektrycznego i nie wyjmować z gniazdka mokrymi rękami.
- Urządzenia lub zasilacza nigdy nie zanurzać w wodzie, lub innych cieczach (nawet częściowo) i nie myć pod bieżącą wodą!
- Zasilacz sieciowy dostarczony z urządzeniem jest przeznaczony wyłącznie do tego urządzenia, nie należy używać go do innych celów.
- Podczas ładowania urządzenie jest ciepłe, co jest absolutnie normalne.
- Ładowanie akumulatora wykonywać w normalnej temperaturze pokojowej.
- Nie należy ładować urządzenia na pełnym słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła, a jeśli temperatura wynosi poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C, ma negatywny wpływ na trwałość akumulatora.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego adaptera.
- Nie dopuszczaj, aby przewód zasilający luźno wisiał nad krawędzią powierzchni roboczej, gdzie mogą dosięgnąć dzieci.
- Przewód zasilający nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień. Nie zanurzać w wodzie lub nie ginać przez ostre krawędzie.

Uwaga

Spółka ETA a.s. nie jest licencjonowanym dostawcą opieki zdrowotnej i kosmetycznej i nie posiada wiedzy fachowej w zakresie leczenia, diagnozowania stanu zdrowia i z tym związanego działania lub stosowności użycia urządzeń, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na stan zdrowia. Podczas jakiegokolwiek ćwiczenia, terapii masażowej, lub zabiegu kosmetycznego istnieje teoretyczna możliwość zranienia fizycznego lub np. pogorszenia objawów już istniejących chorób. Używając tego urządzenia klient wyraża zgodę na to, że używa go na własne ryzyko i przyjmuje wszelkie ryzyka zranienia lub pogorszenia stanu zdrowia na siebie. Wyraża również zgodę na zwolnienie od jakichkolwiek roszczeń (znanych i nieznanych) spółki ETA a.s., które wynikają z nieprawidłowego używania tego urządzenia lub z zaniedbania. Przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia, należy najpierw zasięgnąć porady swojego lekarza.

II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

A – Obudowa urządzenia

- A1 – przycisk włączenia/wyłączenia + przycisk nastawienia trybu pracy
- A2 – przycisk nastawienia temperatury
- A3 – przycisk nastawienia intensywności galwanizacji
- A4 – głowica aplikacyjna
- A5 – światło LED (niebieskie/czerwone) do terapii fotonowej
- A6 – obszar kontaktu dla prawidłowego działania galwanizacji
- A7 – kratka wentylacyjna
- A8 – gniazdko USB do ładowania

B – Wyświetlacz LED

- B1 – intensywność galwanizacji (L - niska / M - średnia / H - wysoka)
- B2 – sygnalizacja jonizacji
- B3 – ryby pracy (CLEANSING / IMPORT / LIFTING / EYE CARE / COOL)
- B4 – symbol ogrzewania (3 poziomy)
- B5 – symbol chłodzenia
- B6 – kontrolka akumulatora

C – Pierścień do umocowania tkaniny

D – Stojak do odkładania

E – Kabel USB *

* Kabel USB: do tego kabla USB podłączyć źródło z USB (na przykład zasilacz sieciowy prądu przemiennego, zapasowe źródło energii itp.).

III. INSTRUKCJE DOT. OBSŁUGI

Przed prawidłowym korzystaniem z urządzenia, należy naładować akumulator. Urządzenie można ładować za pomocą kabla USB podłączonego do źródła prądu tj. zasilacza prądu przemiennego lub zapasowego źródła zasilania.

ŁADOWANIE

- Przed pierwszym użyciem lub jeśli nie korzystano z urządzenia przez dłuższy czas, należy naładować je całkowicie.
- Standardowy czas ładowania wynosi **ok. 2,5 godz.** a w pełni naładowany akumulator zapewnia czas pracy **do 5 godz.** Czas pracy skraca się w zależności od obciążenia urządzenia oraz wieku i zużycia akumulatora.

UWAGA

Do ładowania urządzenia nie używać portów USB innych urządzeń (np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, itp.). Te urządzenia nie muszą być skonstruowane na obciążenia prądowe maszyny i może dojść do ich uszkodzenia.

1. Podłączyć urządzenie przez kabel USB **E** do źródła zasilania (ładowarki). Podczas ładowania można używać urządzenia.
2. Nie przekraczać określonego czasu ładowania!

Uwaga

Stan i przebieg ładowania akumulatora jest wyświetlany na wyświetlaczu z pomocą kontrolki **B6**. Podczas ładowania stopniowo przybywają segmenty a po pełnym naładowaniu kontrolka **B6** świeci ciągle.

Zoptymalizować żywotność akumulatora

- Nie zostawiać podłączonego kabla USB w urządzeniu.
- Podczas ładowania lub działania urządzenie nagrzewa się, co jest normalne i nie jest powodem do reklamacji.

OBŚLUGA**Uwaga**

Dla prawidłowego funkcjonowania galwanizacji jest konieczne dotykanie podczas używania (ręką/palcami) obszaru **A6**. Z tego wynika, że wyrób jest przeznaczony wyłącznie do osobistej pielęgnacji.

Przycisk włączenia/wyłączenia + przycisk nastawienia trybu pracy (A1)

- Długim naciśnięciem przycisku **A1** (na ok. 2 sec.) włączyć/wyłączyć urządzenie. Po włączeniu i wyłączeniu zabrzmi sygnał dźwiękowy.
- Naciskając krótko przycisk **A1** można przełączać między poszczególnymi trybami pracy. Nastawienie trybu pracy jest sygnalizowane na wyświetlaczu B świeceniem odpowiedniej nazwy (CLEANSING / IMPORT / LIFTING / EYE CARE / COOL).

Przycisk nastawienia temperatury (A2)

- Krótkim naciśnięciem przycisku **A2** można nastawić temperaturę (poziom) ogrzewania w trzech stopniach. Nastawiona temperatura jest sygnalizowana na wyświetlaczu **B** poszczególnymi segmentami obok symbolu **B4**.
- Temperaturę można regulować w trybach CLEANSING, IMPORT i LIFTING.

Przycisk do nastawienia intensywności galwanizacji (A3)

- Krótkim naciśnięciem przycisku **A3** można nastawić intensywność galwanizacji w trzech poziomach. Nastawiona intensywność galwanizacji jest sygnalizowana na wyświetlaczu **B** świeceniem odpowiedniego symbolu **B1** (L - niska / M - średnia / H - wysoka).
- Intensywność galwanizacji można regulować w trybach CLEANSING, IMPORT i LIFTING.
- W trybie EYE CARE można krótkim naciśnięciem przycisku **A3** włączyć/wyłączyć czerwone światło.

TRYBY PRACY I ICH UŻYCIE**CLEANSING**

Ten tryb pracy jest przeznaczony do efektywnego i dogłębnego czyszczenia cery. Chodzi o kombinację dodatniej jonizacji, ogrzewania i wibracji. Dzięki temu trybowi pracy można usuwać obumarłe komórki skóry, tój, zanieczyszczenia, resztki makijażu, itp.

Postępowanie (rys. 3):

1. Na głowicę aplikacyjną **A4** zainstalować bawełnianą tkaninę i nanieść na nią środek do usuwania makijażu (rys. 2).
2. Włączyć urządzenie z pomocą przycisku **A1**, nastawić tryb CLEANSING i chwycić urządzenie tak, aby dotykać (ręką/palcami) obszaru **A6**.
3. Według potrzeby i wrażliwości cery z pomocą przycisku **A2** można nastawić temperaturę i z pomocą przycisku **A3** nastawić intensywność galwanizacji.
4. Delikatnie masować partie twarzy według rys. 3.

Zalecenie

- Częstość używania trybu CLEANSING: 2-3x na tydzień (osoby z wrażliwą cerą 1-2x na tydzień)
- Czas trwania zabiegu w trybie CLEANSING: 4 minuty (osoby z wrażliwą cerą 1-2 minuty)

IMPORT

Ten tryb pracy jest przeznaczony do łatwiejszego wprawiania preparatów kosmetycznych do głębszych warstw cery. Chodzi o kombinację jonizacji ujemnej czerwonym światłem, ogrzewania i wibracji. Dzięki temu trybowi pracy można efektywnie wprawić do cery preparaty kosmetyczne, takie jak np.: kremy nawilżające i odmładzające, kwas hialuronowy, oligopeptydy, itp.

Postępowanie (rys. 4):

1. Nanieść na cerę żądany preparat kosmetyczny.
2. Włączyć urządzenie z pomocą przycisku **A1**, nastawić tryb pracy IMPORT i chwycić urządzenie tak, aby dotykać (ręką/palcami) obszaru **A6**.
3. Według potrzeby i wrażliwości cery z pomocą przycisku **A2** można nastawić temperaturę i z pomocą przycisku **A3** nastawić intensywność galwanizacji.
4. Według rys. 4 przejechać poszczególne partie twarzy. Jak tylko będzie wyczuwalny opór na głowicy aplikacyjnej, oznacza to, że preparat jest wchłonięty do cery i można przejść na następne części twarzy.

Zalecenie

- Częstość używania trybu pracy IMPORT: 2-3x na tydzień (osoby z wrażliwą cerą 1-2x na tydzień)
- Czas trwania zabiegu w trybie IMPORT: 4 minuty (osoby z wrażliwą cerą 1-2 minuty)

LIFTING

Ten tryb pracy jest przeznaczony do wygładzenia i udelikatnienia rysów twarzy. Chodzi o kombinację ogrzewania, jonizacji i terapii impulsowej EMS, która z pomocą impulsów elektrycznych działa na mięśnie twarzy i elastyczne włókna kolagenowe.

Postępowanie (rys. 5):

1. Nanieść na głowicę aplikacyjną **A4** odpowiedni żel.
2. Włączyć urządzenie z pomocą przycisku **A1**, nastawić tryb LIFTING i chwycić urządzenie tak, aby dotykać (ręką/palcami) obszaru **A6**.
3. Według potrzeby i wrażliwości cery z pomocą przycisku **A2** można nastawić temperaturę i z pomocą przycisku **A3** nastawić intensywność galwanizacji.
4. Według rys. 5 przejechać poszczególne partie twarzy od wewnątrz na zewnątrz.

Zalecenie

- Częstość używania trybu LIFTING: 1-2 x na tydzień (osoby z wrażliwą cerą 1x na tydzień)
- Czas trwania zabiegu w trybie LIFTING: 4-8 minut

EYE CARE

Ten tryb pracy jest przeznaczony do pielęgnacji cery w okolicy oczu. Chodzi o kombinację ogrzewania, jonizacji, wibracji i opcjonalnej funkcji terapii fotonowej czerwonym światłem. Dzięki temu trybowi pracy można łatwo zaprawić maski oczne, kremy, itp.

Postępowanie (rys. 6):

1. Nanieść na cerę w okolicy oczu żądany preparat kosmetyczny.
2. Włączyć urządzenie z pomocą przycisku **A1**, nastawić tryb EYE CARE i chwycić urządzenie tak, aby dotykać (ręką/palcami) obszaru **A6**.
3. Według potrzeby można włączyć/wyłączyć funkcję terapii fotonowej krótkim naciśnięciem przycisku **A3**.
4. Delikatnie masować okolice oczu według rys. 6.

Zalecenie

- Częstość używania trybu EYE CARE: 2-3x na tydzień (osoby z wrażliwą cerą 1-2x na tydzień)
- Czas trwania zabiegu w trybie EYE CARE: 4 minuty (osoby z wrażliwą cerą 1-2 minuty)

COOL

Ten tryb pracy jest przeznaczony do uspokojenia cery. Chodzi o kombinację chłodzenia i terapii fotonowej niebieskim światłem, które działa przeciwzapalnie. Dzięki temu obniża się zaczerwienienie cery z trądzikiem i łatwo wprawia się maski uspokajające i odświeżające.

Postępowanie (rys. 7):

1. Nanieść na cerę żadaną maskę.
2. Włączyć urządzenia przyciskiem **A1** i nastawić tryb pracy COOL.
3. Delikatnie naciskać na wrażliwe lub zaczerwienione miejsca według rys. 7.

Zalecenie

- Częstość używania trybu COOL: 2-3x na tydzień
- Czas trwania zabiegu w trybie COOL: 3 minuty (w każdym miejscu maksymalnie 5 sekund)

Funkcja automatycznego wyłączenia

W trybach pracy **CLEANSING / IMPORT / LIFTING / EYE CARE** po ok. 4 minutach dojdzie do wyłączenia nastawionej funkcji (zabrzmii sygnał akustyczny). Po następnej ok. 1 minucie urządzenie wyłączy się całkowicie (zabrzmii sygnał akustyczny).

Przy użyciu trybu **COOL** po ok. 3 minutach dojdzie do wyłączenia nastawionej funkcji (zabrzmii sygnał akustyczny). Po następnej ok. 1 minucie urządzenie wyłączy się całkowicie (zabrzmii sygnał akustyczny).

IV. KONSERWACJA

Urządzenie należy wyczyścić po każdym użyciu! Powierzchnię urządzenia i kabel USB wycierać tylko miękką wilgotną szmatką, stojak do odkładania D można oplukać pod bieżącą wodą. Nie używać ostrych i agresywnych detergentów!

Rozległą konserwację lub konserwację, która wymaga ingerencji do wewnętrznej części urządzenia, może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!

24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.

V. EKOLOGIA

Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Bezpieczne usuwanie zużytych akumulatora, za pośrednictwem specjalnych punktów zbiórki. Nigdy nie wrzucać akumulatora do ognia!

Wymywanie akumulatora

Akumulator można wyjąć z urządzenia dopiero po całkowitym rozładowaniu i po zakończeniu żywotności urządzenia! Podczas normalnego użytkowania akumulatora nie wyjmuje się! Z pomocą odpowiedniego narzędzia usunąć gumowe zaślepki śrub, z pomocą śrubokręta odkręcić śrubki a następnie wyjąć akumulator.

VI. DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie (V) | wskazane na tabliczce znamionowej |
| Waga urządzenia (g) | 145 |
| Urządzenie klasy ochrony | III. |
| Wymiary (V x D x Ś); mm | 51 x 163 x 58 |

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.


OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołatkach, łóżeczkach, wózkach lub kocykach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

Symbol  oznacza **OSTRZEŻENIE**.



Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natrysków, umywalk lub innych pojemników z wodą.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką **ETA**, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.

- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawkę, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

| | |
|---|---|
| Nazwa: | Pieczęć i podpis sprzedawcy: |
| Data sprzedaży: | |
| Numer serii: | |
| 1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta: | 2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta: |
| 3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta: | 4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta: |

eta

© DATE 27/06/2022

e.č. 23/2022