

waterpik®

Waterpik® ION Model WF-11



.....
www.waterpik.com

Ładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem

Ładowarka USB nie znajduje się w zestawie. Do ładowania tego produktu wymagana jest ładowarka USB o następujących parametrach: USB Typ-A, Wyjście znamionowe: 5,0 VDC, 1,0 A.

Przed podłączeniem ładowarki należy upewnić się, że styki na kablu i urządzeniu są czyste i suche.

Podłącz ładowarkę USB do gniazdka ściennego i podłącz kabel magnetyczny ładowarki do urządzenia. Wskaźnik ładowania na urządzeniu będzie świecił podczas ładowania, a następnie zacznie migać co 3 sekundy, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane. Pełne naładowanie wystarcza na około 4 tygodnie przy korzystaniu z urządzenia raz dziennie przez jedną minutę dziennie.

Gdy baterie wymagają naładowania (pozostało około 30% naładowania) wskaźnik naładowania migie szybko 3 razy, aby wskazać, że użytkownik powinien odłączyć ładowarkę od urządzenia. Całkowite naładowanie zajmie 4,5-5 godzin. Jeśli użytkownik będzie używać urządzenia raz dziennie lub rzadziej, zaleca się ładowanie urządzenia co 3-4 tygodnie. Jeśli urządzenie jest używane dwa lub więcej razy dziennie, należy ładować je częściej.

Przygotowanie zbiornika

Wyjmij zbiornik, podnieś pokrywę i napełnij go ciepłą wodą. Umieść zbiornik na podstawie, mocno dociśnij i zamknij pokrywę.

Wkładanie i wyjmowanie końcówek

Włóż końcówkę do środka uchwytu irygatora, mocno dociskając, aż końcówka zatrzaśnie się na swoim miejscu. Kolorowy pierścień zrówna się z górną częścią uchwytu, jeśli końcówka jest prawidłowo zablokowana. Aby wyjąć końcówkę z uchwytu, przesuń przycisk wysuwania końcówki na uchwycie.

Uruchomienie urządzenia (tylko przy pierwszym użyciu)

Ustaw regulator ciśnienia na podstawie na wysoki (ustawienie ciśnienia nr 10), skieruj uchwyt i końcówkę do zlewu. Włącz zasilanie i poczekaj, aż z końcówki zacznie wypływać woda.

Regulacja ustawienia ciśnienia

Przy pierwszym użyciu ustaw regulator ciśnienia na podstawie urządzenia na najniższe ustawienie (ustawienie ciśnienia nr 1). Z czasem stopniowo zwiększaj ciśnienie do preferowanego ustawienia - lub ustaw je zgodnie z zaleceniami lekarza dentystry.

Korzystanie z irygatora wodnego

Zawsze umieszczaj końcówkę w ustach przed włączeniem urządzenia. Z przełącznikiem wody na uchwycie w pozycji OFF, włącz zasilanie. Pochyl się nad zlewem i lekko zamknij usta na tyle, aby zapobiec rozpryskiwaniu wody, jednocześnie umożliwiając jej przepływ z ust do zlewu. Po zakończeniu irygacji wyłącz zasilanie. *Podczas użytkowania możesz zatrzymać przepływ wody, przesuując przełącznik wody na uchwycie do pozycji OFF. **UWAGA:** Silnik będzie nadal pracował.

Wyjmowanie baterii

Akumulator litowo-jonowy znajdujący się wewnątrz tego produktu nie może być wymieniony, należy go wyjąć pod koniec okresu użytkowania produktu przed poddaniem go recyklingowi.

Proces ten nie jest odwracalny i powoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

Podczas wykonywania poniższej procedury należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy chronić oczy, dłonie, palce i powierzchnię, na której pracujesz. Przed wyjęciem baterii, urządzenie należy rozładować, aż przestanie działać.

1. Odwróć urządzenie. Usuń etykietę produktu (tylko model WF-12).
2. Zdejmij 4 gumowe nóżki, ostrożnie podważając je małym płaskim śrubokrętem.
3. Odkręć 5 śrub ze wskazanych miejsc za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego.
4. Obróć urządzenie pionowo i zdejmij zbiornik oraz pokrywę zbiornika.
5. Zdejmij górną obudowę, pociągając ją do góry, jak pokazano na rysunku.
6. Wykręć śruby ze wskazanych miejsc za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego.
7. Odciągnij zespół płytki drukowanej na bok. Następnie dkręć 4 śruby ze wskazanych miejsc za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego.
8. Podnieś pokrywę baterii, jak pokazano na rysunku.
9. Wyjmij baterię z obudowy.
10. Odetnij czarny przewód baterii nożyczkami lub nożycami bocznymi, a następnie odetnij czerwony przewód baterii. czerwony przewód baterii.

UWAGA: NIE PRZECINAJ OBU PRZEWODÓW BATERII JEDNOCZEŚNIE.

11. Urządzenie i akumulator należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SERWIS I GWARANCJA 12 miesięcy

POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu 1-go roku od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnioną gwarancję w oryginale. POLKARD Bis Sp. z o.o. naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem: **POLKARD BIS Sp.** z o.o. ul. M.Kotańskiego 2, 10- 166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850 w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

Jeżeli urządzenie zostanie zarejestrowane w ciągu 14 dni od daty zakupu na stronie: rejestracja.polkardbis.pl, zostanie objęte 2 letnią gwaracją.

Producent:

waterpik

1730 East prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
USA

Dystrybucja w Polsce:



Polkard bis

Polkard Bis Sp. z o.o.
Ul. Marka Kotańskiego 2
10-166 Olsztyn
tel/fax. 089/5338777
www.polkardbis.pl
e-mail: biuro@polkardbis.pl

Data zakupu:

Nr Seryjny:

Pieczęć i podpis sprzedawcy



WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	str 2
OPIS PRODUKTU	str 3
PRZYGOTOWANIE - ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA, UŻYWANIE KOŃCÓWEK, KONSERWACJA	str 4
PIELĘGNACJA SZCZOTECZKI OSCYLACYJNEJ	str 5
PIELĘGNACJA SZCZOTECZKI SONICZNEJ	str 6
UŻYWANIE KOŃCÓWEK, KONSERWACJA	str 7
SERWIS I GWARANCJA	str 8

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Używając produktów elektrycznych, w szczególności w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności łącznie z:

PRZECZYTANIEM WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby zmniejszyć zagrożenie porażenia prądem elektrycznym:

- Nie obsługiwać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczać ani nie wkładać do wody lub innych cieczy.
- Nie używać podczas kąpieli.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać produktu w miejscu, gdzie może spaść lub zostać wciągniętym do wanny lub zlewu.
- Nie sięgać po urządzenie, które spadło do wody.
- Natychmiastowo odłączyć wtyczkę.
- Sprawdzić czy przewód zasilania nie jest uszkodzony przed pierwszym użyciem i podczas eksploatacji urządzenia.




OSTRZEŻENIE:

- Aby zmniejszyć zagrożenie oparzeniami, porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub urazem osób:
- Nie podpinaj opisywanego urządzenia do systemu o napięciu innym niż określone na urządzeniu.
 - Nie używać urządzenia, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone lub wpadło do wody. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem (patrz str.8).
 - Nie kierować wody pod język, do uszu, nosa lub innych delikatnych stref. Produkt może wytworzyć ciśnienia, które mogą spowodować poważne uszkodzenia tych stref.
 - Używać produktu wyłącznie w sposób podany w niniejszych instrukcjach lub jak zaleca stomatolog.
 - Używać wyłącznie końcówek lub akcesoriów zalecanych przez Water Pik, Inc.

- Nie upuszczać ani nie umieszczać żadnych obiektów w otworze lub węży.
- Trzymać przewód elektryczny z daleka od ogrzewanych powierzchni.
- Nie używać irygatora Water Flosser lub Szczoteczki Sonicznej na zewnątrz pomieszczeń ani w miejscach gdzie używane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
- Nie używać jodu, wybielacza lub stężonych olejków eterycznych nierozpuszczalnych w wodzie. Użycie wspomnianych produktów może zakłócić działanie urządzenia i skrócić jego działanie.
- Przed użyciem urządzenia zdjąć biżuterię znajdującą się w jamie ustnej.
- Nie używać irygatora Water Flosser ani Szczoteczki Sonicznej, jeśli użytkownik ma otwarte rany na języku lub w ustach.
- Jeśli lekarz lub kardiolog zalecił przyjmowanie antybiotyków przed zabiegami dentystycznymi to należy zasięgnąć porady dentysty przed użyciem opisywanego urządzenia lub każdego innego środka higieny ustnej.
- Produkt jest zgodny z normami bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik posiada rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenia zawierające magnes bądź elektronikę to należy skontaktować się z lekarzem lub producentem urządzenia przed rozpoczęciem użytkowania Szczoteczki Sonicznej.
- Jeśli końcówka Pik Pocket® (niedolączona we wszystkich modelach) oddzieli się sama od trzonka z jakiegokolwiek powodu to należy wyrzucić ją wraz z trzonkiem i zastąpić nową końcówką Pik Pocket®.
- Nie używać produktu dłużej niż przez 5 minut w ciągu 2 godzin.
- Urządzenie nie posiada części, które użytkownik mógłby sam serwisować i nie wymagają one konserwacji. Nie próbować otwierać żadnego elementu poza wymianą baterii. Patrz strona 10-11 „Wymianowanie baterii”.
- Używanie past do zębów zawierających nadlunek, wodorowęglan sodu, ściernie lub chemiczne środki czyszczące.
- W przypadku stosowania produktu przez dzieci w wieku 8 lat i starsze bądź też osoby o specjalnych wymaganiach należy je dokładnie poinstruować i nadzorować.
- Dzieci muszą być nadzorowane dla zapewnienia, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Urządzenie nie posiada części, które użytkownik mógłby sam serwisować i nie wymagają one konserwacji.
- Napelnić zbiornik wyłącznie ciepłą wodą lub roztworem zalecanym przez stomatologów.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE.


1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Uchwyt
3. Włącznik/wyłącznik wody
4. Regulacja ciśnienia
5. Uchwyt magnetyczny
6. Obrótowy wąż uchwyty
7. Końcówka
8. Obrotnica końcówki
9. Pokrywa zbiornika
10. Zbiornik
11. Przycisk wysuwania końcówki
12. Styki ładowania
13. Podstawa
14. Kabel USB do ładowania

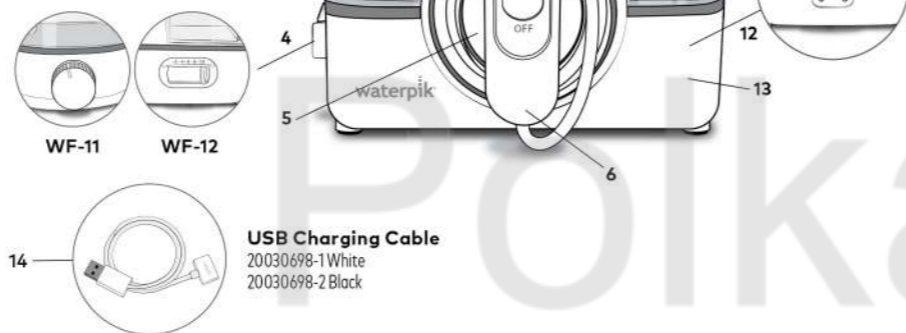

USB Charging Cable
20030698-1 White
20030698-2 Black



KOŃCÓWKI

- A. Końcówka ortodontyczna***
- Aparat ortodontyczny/użycie ogólne
- B. Końcówka Pik Pocket™****
- Kieszonki przyzębne
- C. Końcówka Plaque Seeker™****
- Implanty/Korony/Mosty/Retainery/ Ogólne zastosowanie
- D. Końcówka klasyczna****
- Ogólne zastosowanie
- E. Końcówka do implantów****
- Stałe mosty i protezy na implantach
- F. Końcówka do języka****
- Czyszczenie języka

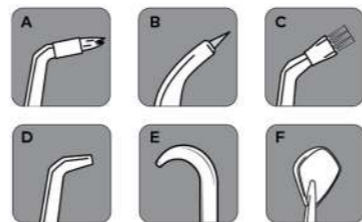

***Wymieniaj co 3 miesiące **Wymieniaj co 6 miesięcy*

Po Szczegółowe informacje na temat końcówek, innych akcesoriów i użytkowania produktu, odwiedź naszą stronę internetową. Końcówki wymienne można nabyć online na stronie www.waterpik.pl

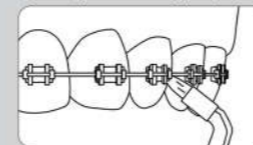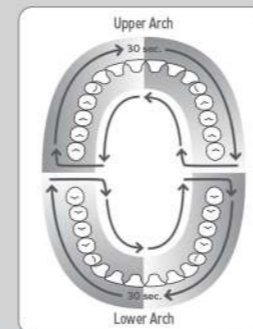

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zacznij od zębów tylnych i kieruj się w stronę zębów przednich. Skierować strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł, trzymając końcówkę w ustach. Przesuń końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymaj się na chwilę między zębami. Kontynuuj, aż wyczyszczisz wewnętrzną i zewnętrzną stronę zarówno górnych, jak i dolnych zębów.

Jednominutowy timer/30-sekundowy stymulator

Irygator zasygnalizuje krótką przerwę po 30 sekundach, aby przypomnieć o przejściu do drugiego łuku jamy ustnej i kolejną krótką pauzę po 1 minucie, aby zasygnalizować osiągnięcie zalecanego czasu czyszczenia. Urządzenie będzie kontynuować pracę do momentu jego wyłączenia. W zależności od ustawienia ciśnienia, część wody może pozostać w zbiorniku po upływie 1 minuty.

Po zakończeniu

Wyłącz zasilanie. Opróżnij zbiornik z płynu. UWAGA: Jeśli użyto płynu do płukania jamy ustnej lub innego roztworu poza wodą, patrz sekcja "Używanie płynu do płukania jamy ustnej i innych roztworów".

SPOSÓB UŻYCIA KOŃCÓWEK

Końcówka Pik Pocket



Końcówka Pik Pocket™ została specjalnie zaprojektowana aby dostarczyć wodę lub roztwór antybakteryjny wgłąb kieszonek przyzębnych. Aby użyć końcówki Pik Pocket™, ustaw urządzenie na najniższe ustawienie ciśnienia. Przyłóż miękką końcówkę do zęba pod kątem 45 stopni i delikatnie wprowadź końcówkę pod linię dziąseł, do kieszonki.

Końcówka do czyszczenia języka

Ustaw najniższe ciśnienie, umieść końcówkę na środku języka mniej więcej w połowie jego długości, następnie przesuwaj końcówkę lekko do przodu. Zwiększaj ciśnienie zgodnie z preferencjami.

Końcówka ortodontyczna

Aby użyć końcówki ortodontycznej, delikatnie przesunij końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę między zębami i wokół zamka ortodontycznego, przed przejściem do następnego zęba.

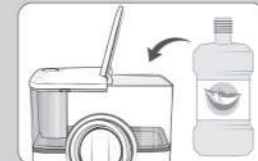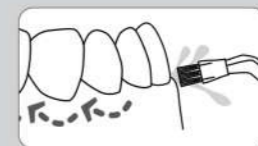

Końcówka do protez implantologicznych

Końcówka Implant Denture jest specjalnie zaprojektowana, aby uzyskać dostęp do obszarów, które są niedostępne za pomocą końcówki Classic Jet, końcówki Plaque Seeker™, końcówki ortodontycznej lub końcówki Pik Pocket™. Aby użyć końcówki Implant Denture, umieść końcówkę po stronie językowej na jednym końcu protezy utrzymywanej na implantach. Otwór końcówki skieruj pomiędzy naturalną tkankę dziąsła a protezę. Powoli przesuwaj końcówkę wzdłuż naturalnej tkanki dziąsła a protezą, aż do wyczyszczenia całego obszaru.

Końcówka Plaque Seeker

Aby użyć końcówki Plaque Seeker™, umieść ją blisko zębów, tak aby włosie delikatnie dotykało zębów. Delikatnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę między zębami, aby delikatnie wyszczotkować zęby i umożliwić przepływ wody.

Używanie płynu do płukania ust i innych rozwiązań

Waterpik® Water Flosser może być używany do podawania płynu do płukania jamy ustnej i roztworów antybakteryjnych. Po użyciu jakiegokolwiek specjalnego roztworu należy przepłukać urządzenie, aby zapobiec jego zatkaniu. Należy napelnić zbiornik ciepłą wodą i uruchomić urządzenie z końcówką skierowaną do zlewu, aż urządzenie będzie puste.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie/kabel ładowarki. W razie potrzeby wyczyść produkt za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnego, nieściernego środka czyszczącego. Zbiornik na wodę jest wymywalny, co ułatwia jego czyszczenie. Zalecamy suszenie na powietrzu zamiast cyklu podgrzewania.

Usuwanie osadów z twardej wody / ogólne czyszczenie

Osady z twardej wody mogą gromadzić się w urządzeniu w zależności od zawartości minerałów w wodzie. Pozostawione bez stałej konserwacji, mogą utrudniać działanie urządzenia. Dodaj 2 łyżki stłofowe białego octu lub miarkę środka do odkamieniania REDESEPT do pełnego zbiornika ciepłej wody. Włącz urządzenie i zostaw włączone do momentu opróżnienia zbiornika. Następnie je przepłukaj pełnym zbiornikiem czystej, ciepłej wody. Proces ten powinien być wykonywany co 1 do 3 miesięcy, aby zapewnić optymalną wydajność i czystość urządzenia.

Wyciek

W przypadku wycieku spowodowanego uszkodzeniem węży, można zakupić rączkę z wężykiem na stronie www.waterpik.pl lub skontaktować się z serwisem Waterpik, w celu uzyskania pomocy.